

Fabrication d'un masque de protection en papier



Masque en papier



- Ce tutoriel décrit les étapes de la fabrication d'un masque de protection en papier.
- Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

Masque en papier




Aspect extérieur du
masque



Aspect intérieur du
masque

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

Matériel

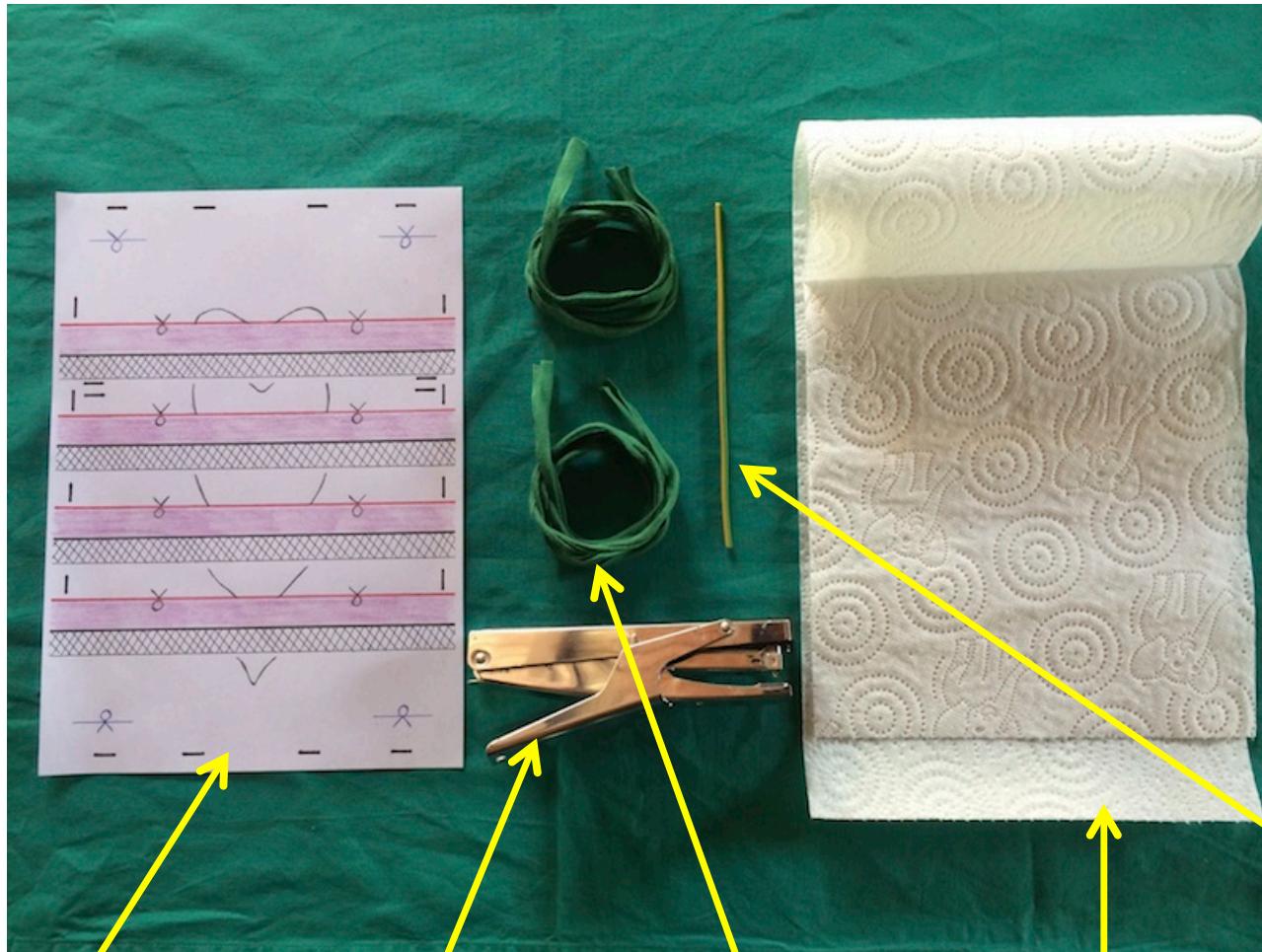

Patron de masque
Feuille Format A4

Agrafeuse


2 liens
de 115 cm

70 cm de papier
essuie-tout

(optionnel)
10 cm de fil
de fer
recouvert
de ruban
adhésif

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.


Patron (format A4)

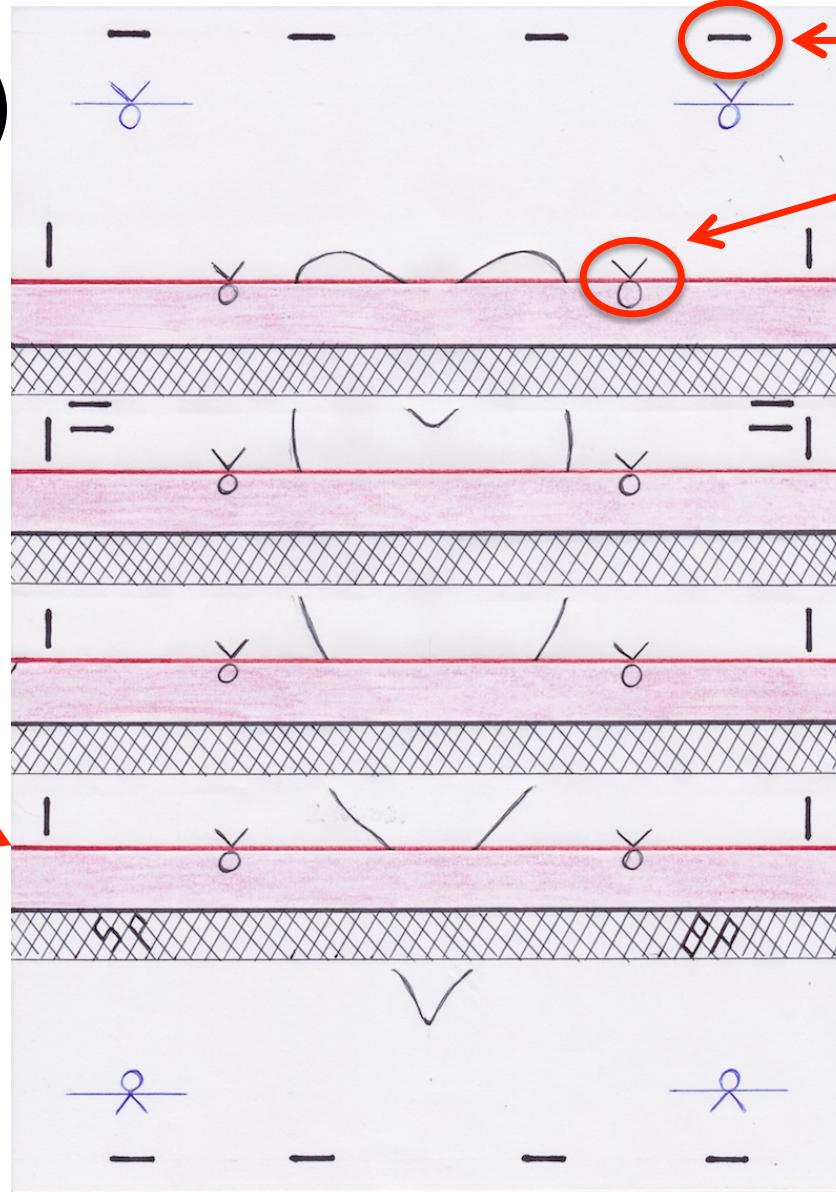

Trait de pliage
rouge
(pli montagne)


Repère d'agrafe
Repère de pliage

Trait de
pliage noir
(pli vallée)

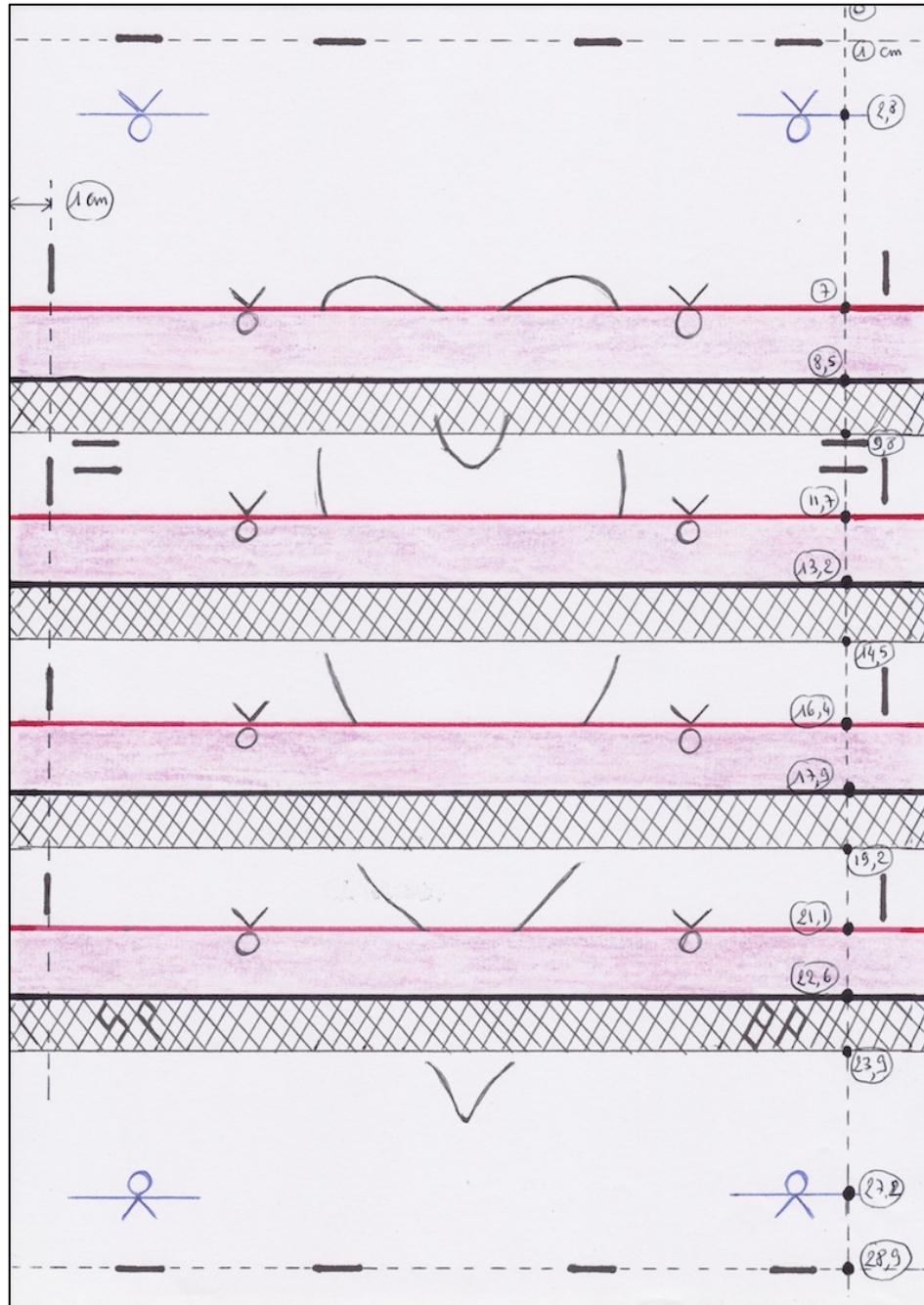

Patron Masque Taille XL-L

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

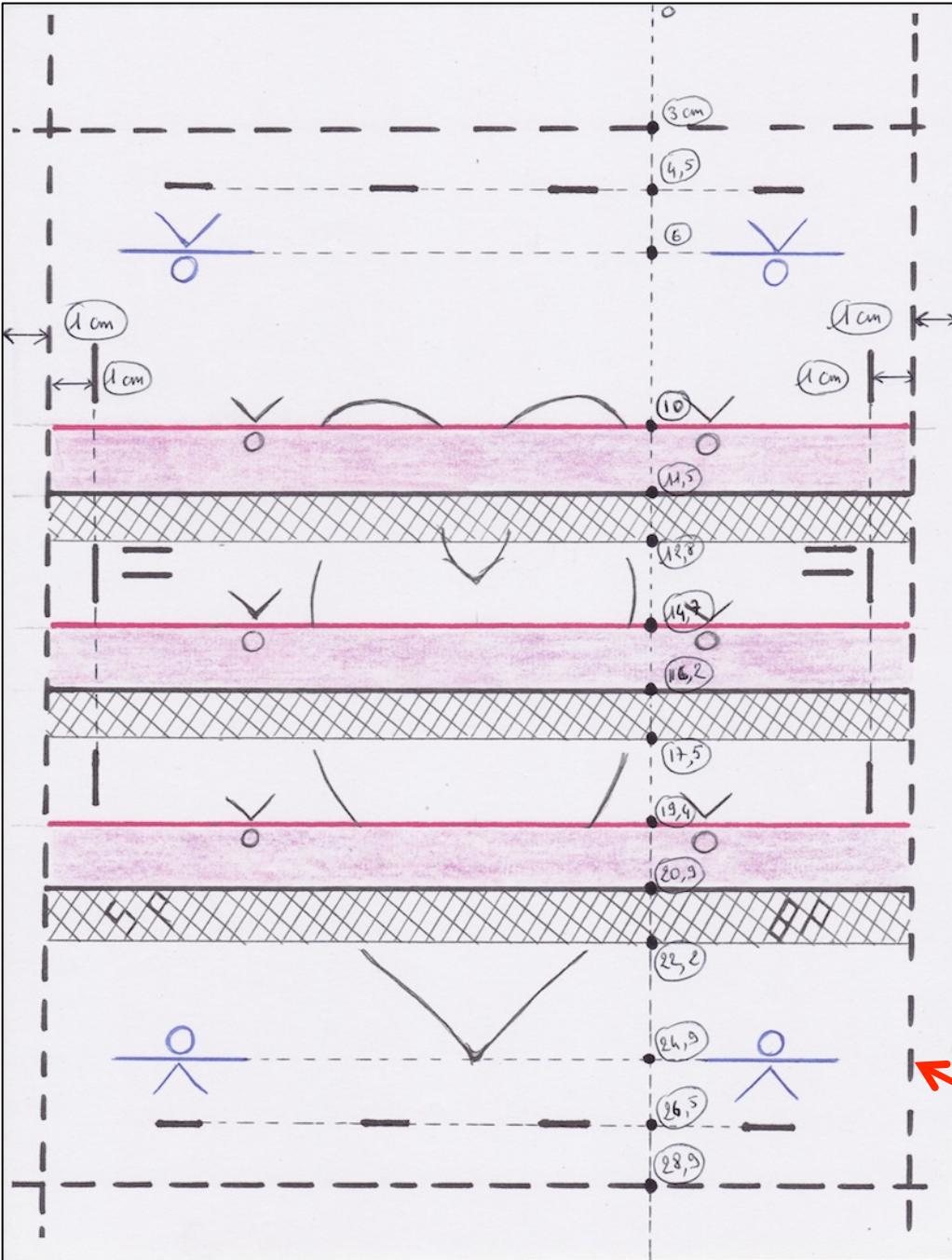

Patron Masque Taille M-S


(Découper le long des pointillés)

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

Etape 1:

Réalisation de la partie externe du masque


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

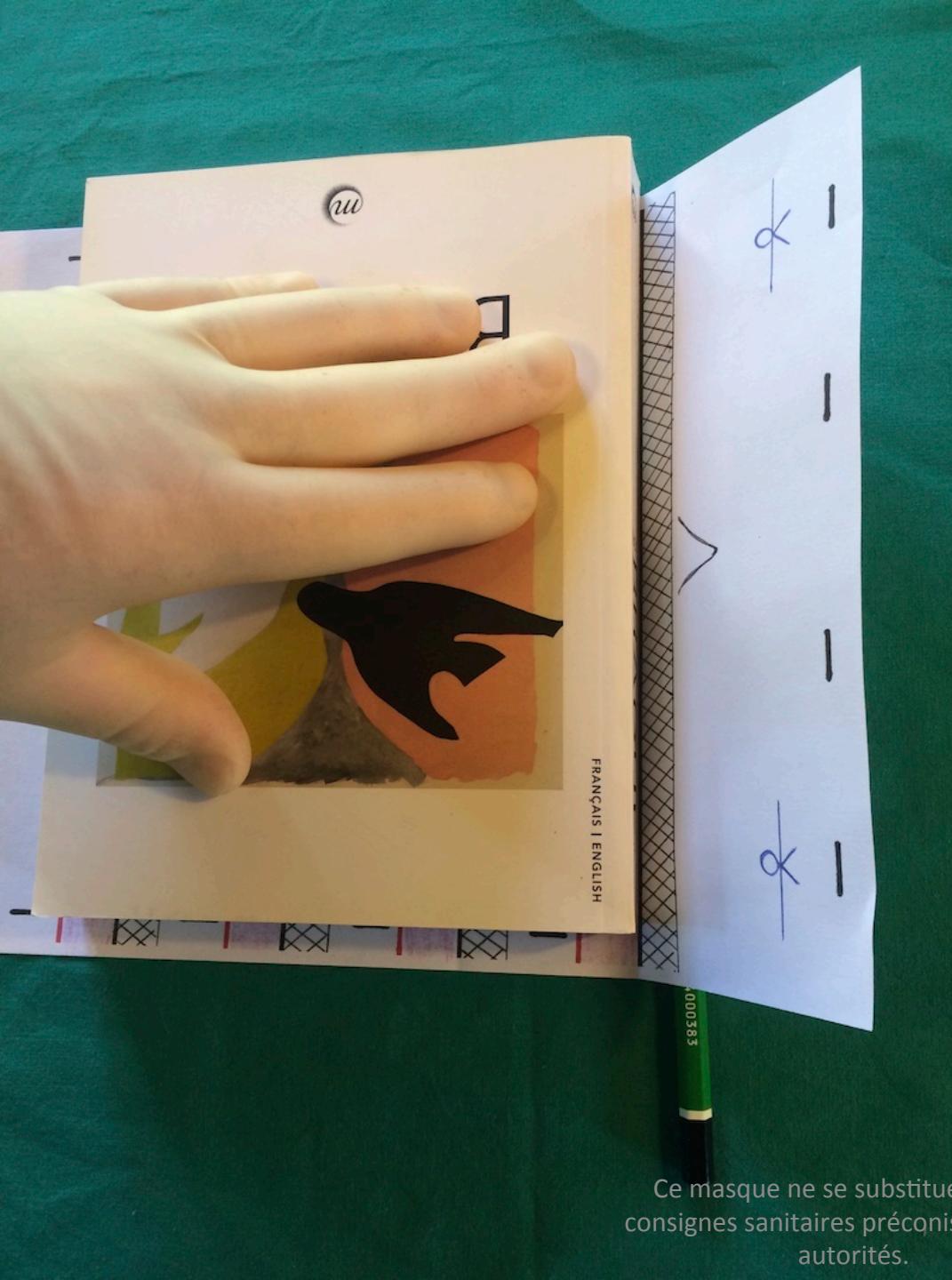

Marquage du 1er pli noir


Positionner une règle
ou le bord d'un livre
sur le premier trait de
pliage noir

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

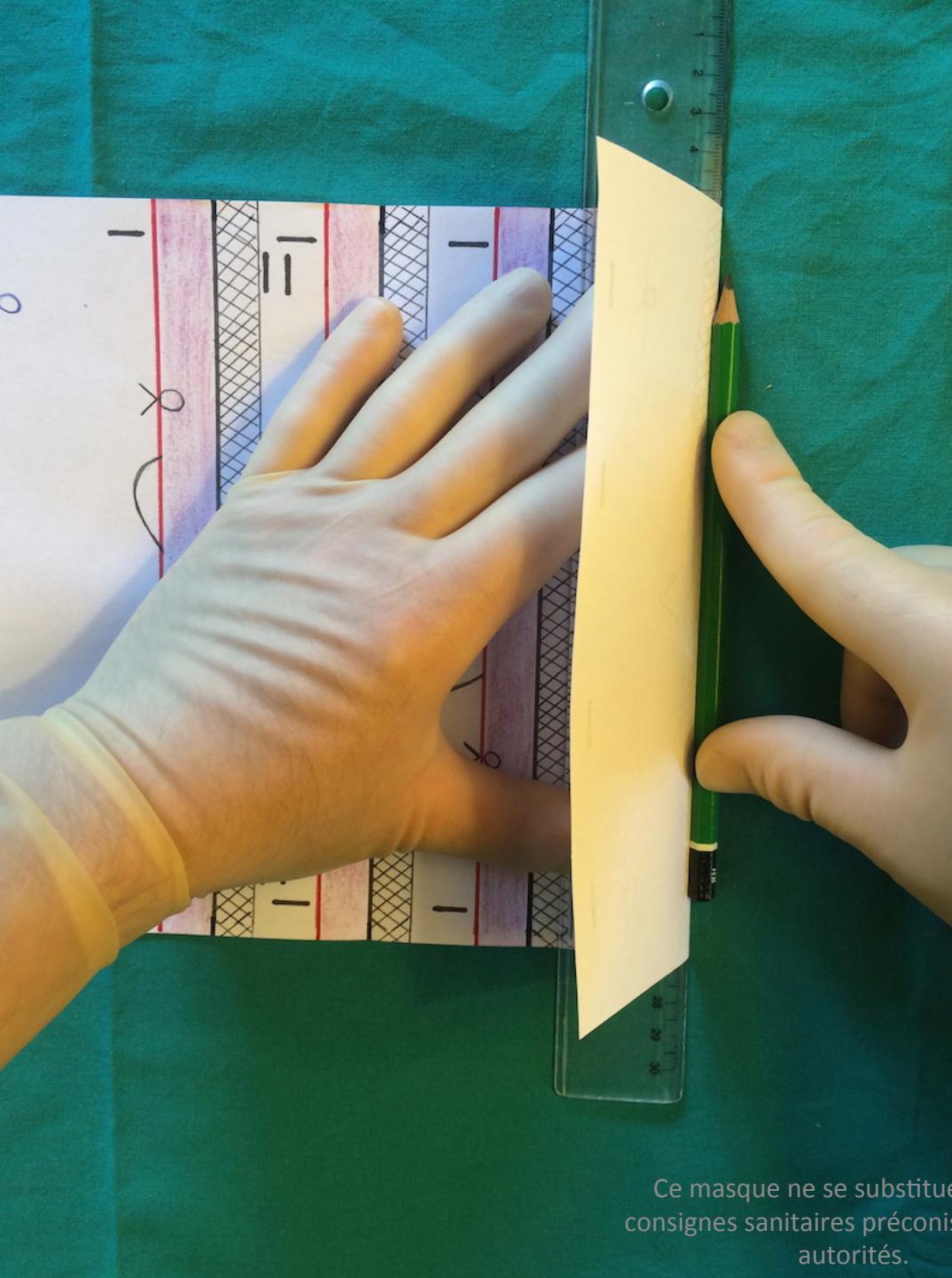

Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le premier pli


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

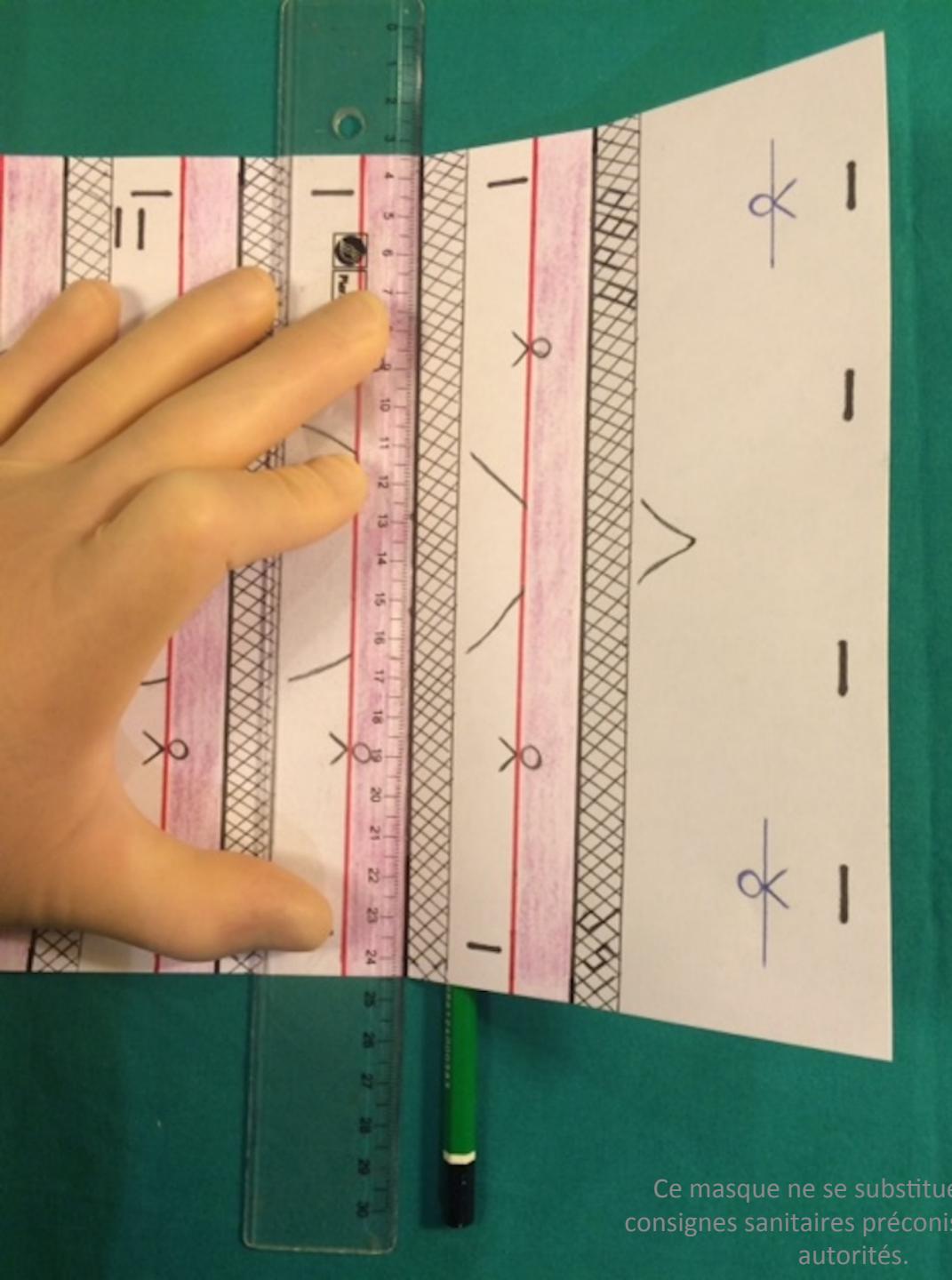

Marquage du 2ème pli noir

Positionner une règle
ou le bord d'un livre
sur le deuxième trait
de pliage noir

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

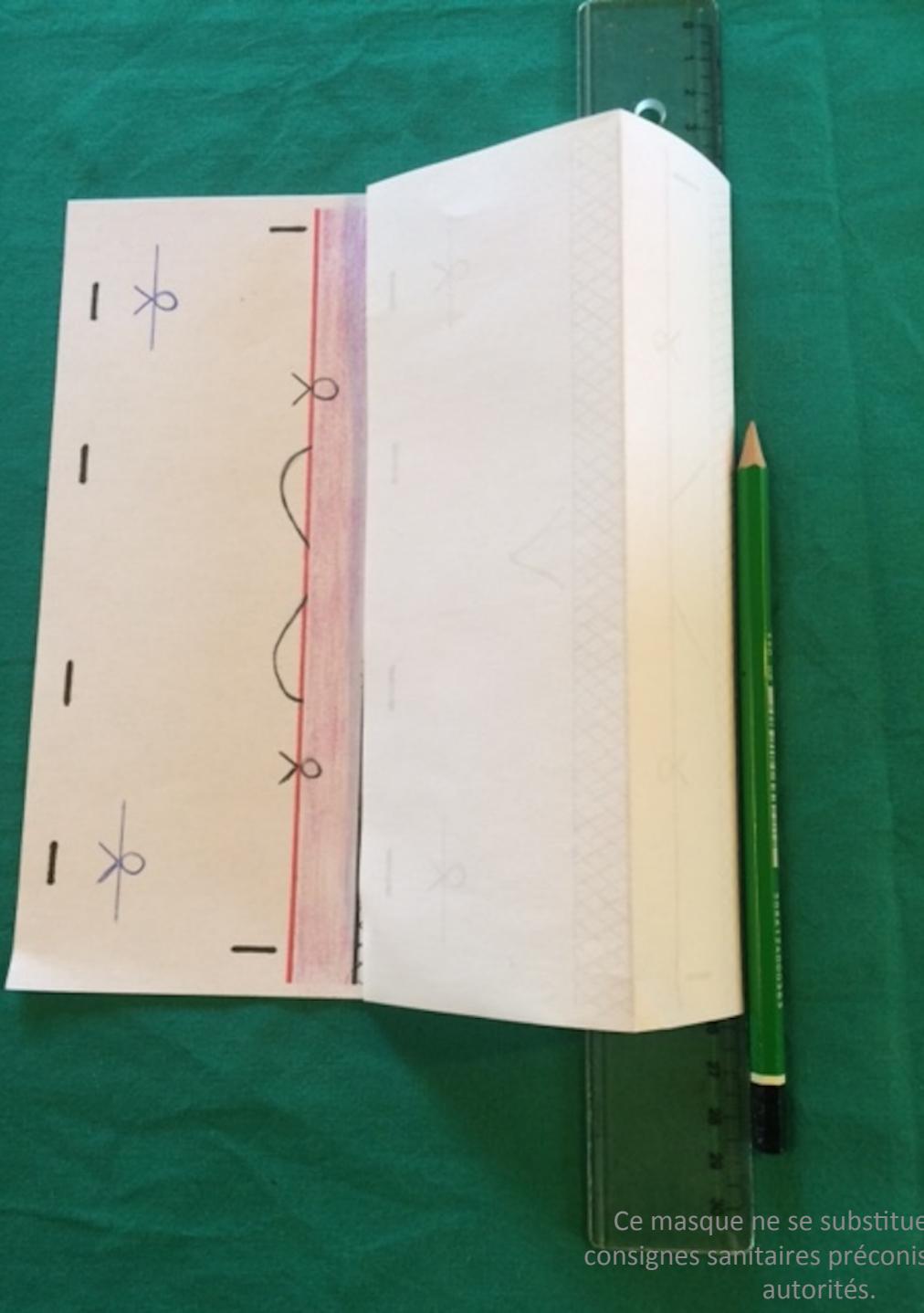


Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le deuxième pli


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

Marquage du 3ème pli noir

Positionner une règle
ou le bord d'un livre
sur le troisième trait
de pliage noir

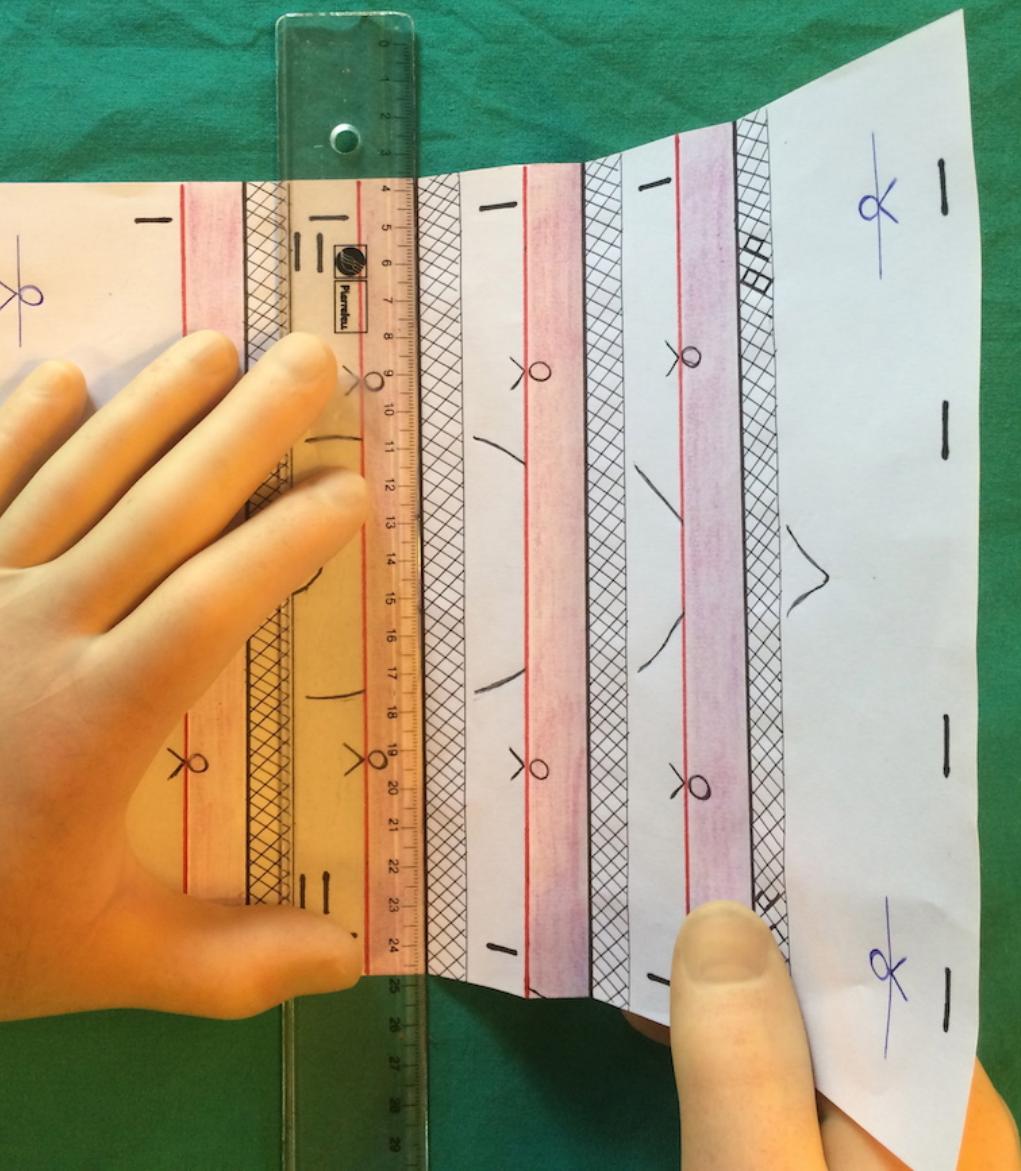


itue pas aux
onisées par les

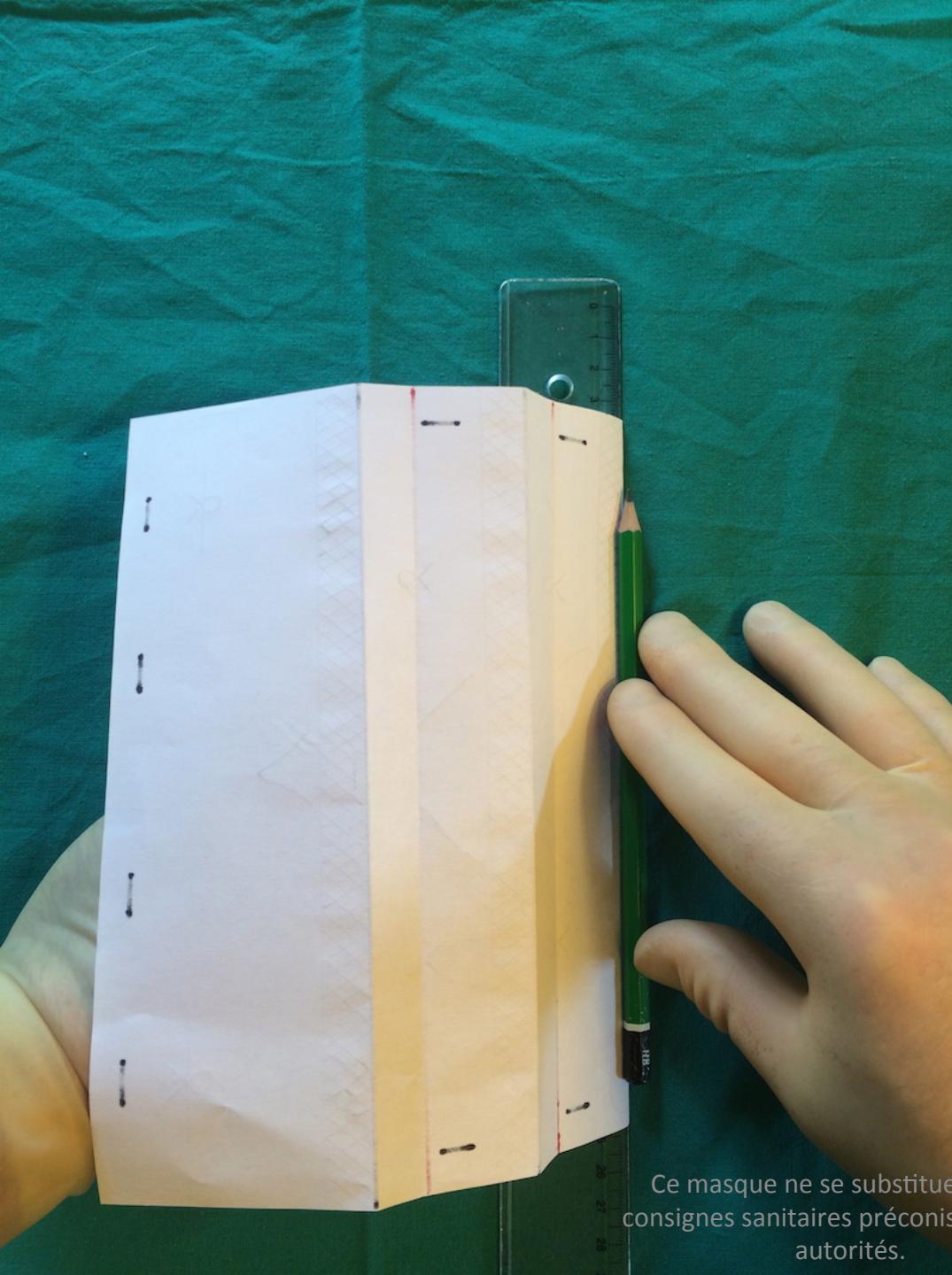

Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le troisième pli

Répéter l'opération pour marquer le quatrième pli

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

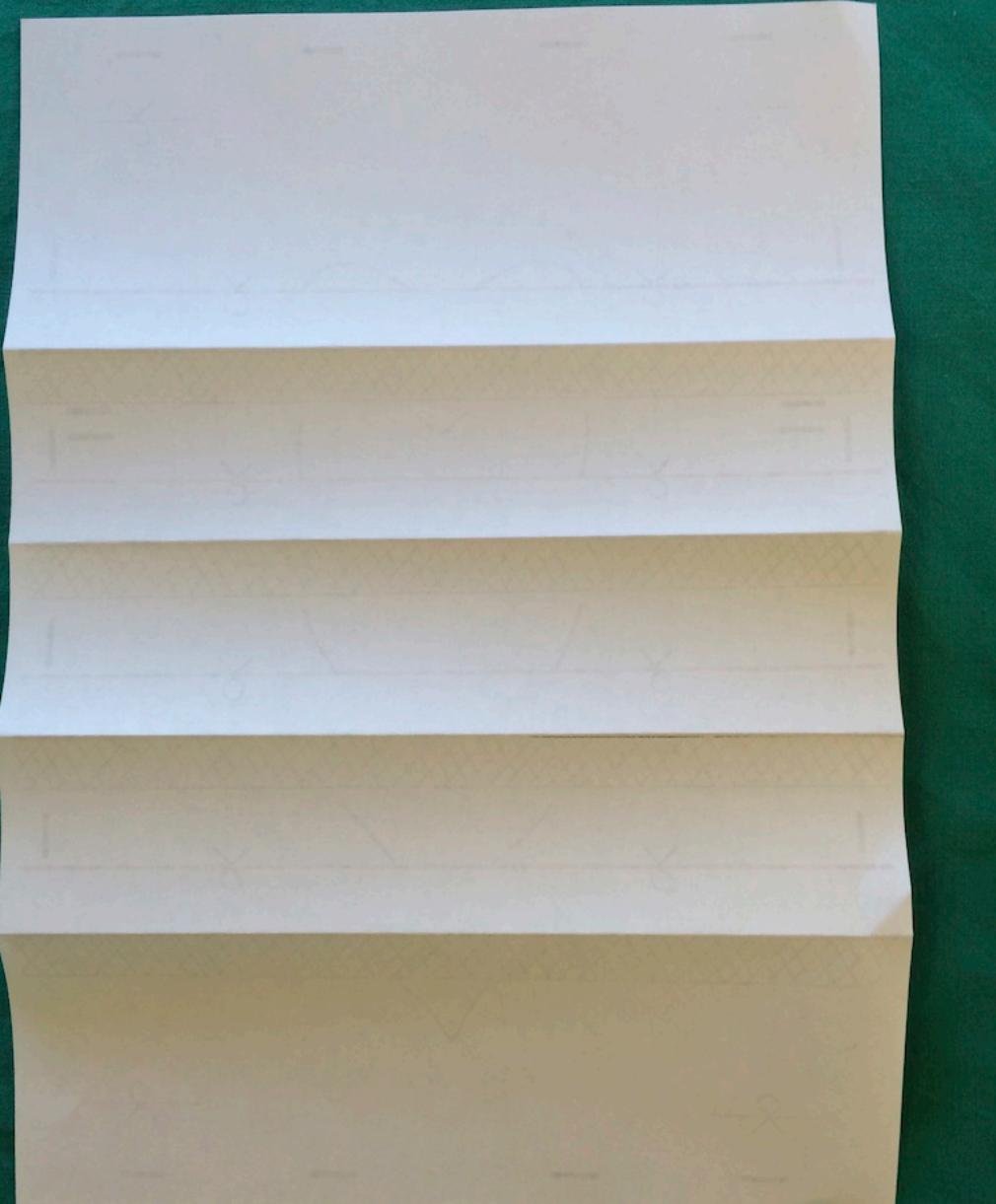

Résultat du
marquage des
quatre plis noirs
(plis vallée)


(verso)

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

Marquage du 1er pli rouge

Réaliser le premier pli rouge le long du premier trait rouge.


Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

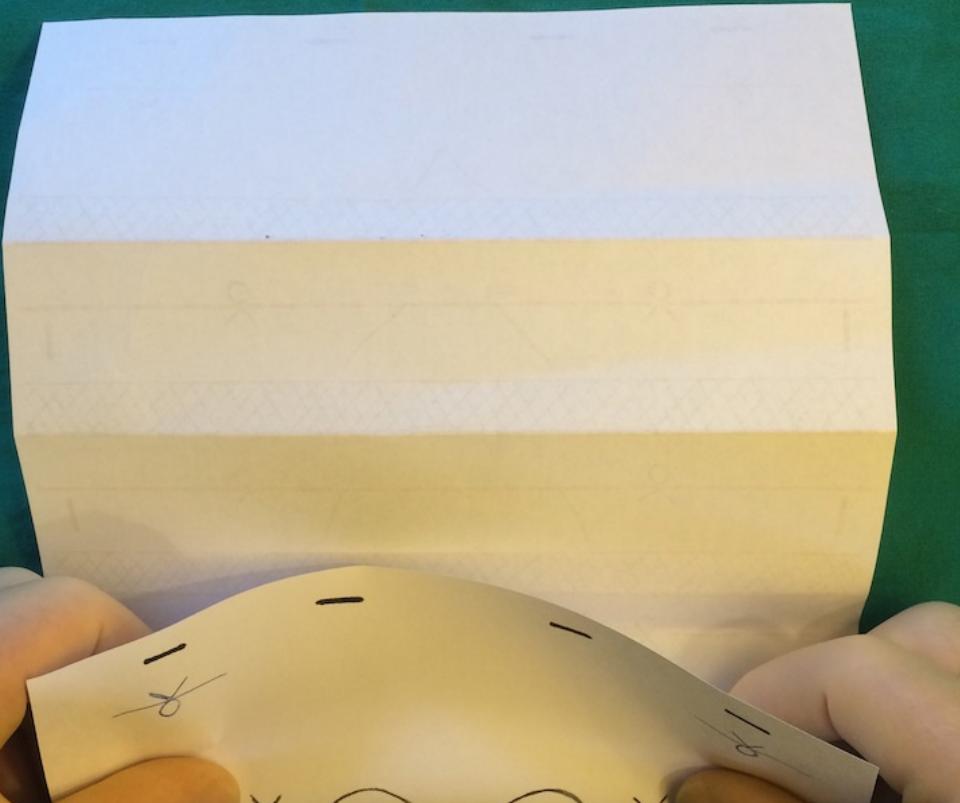


Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

Marquage du 2ème pli rouge

Réaliser le deuxième pli rouge le long du deuxième trait rouge.
Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

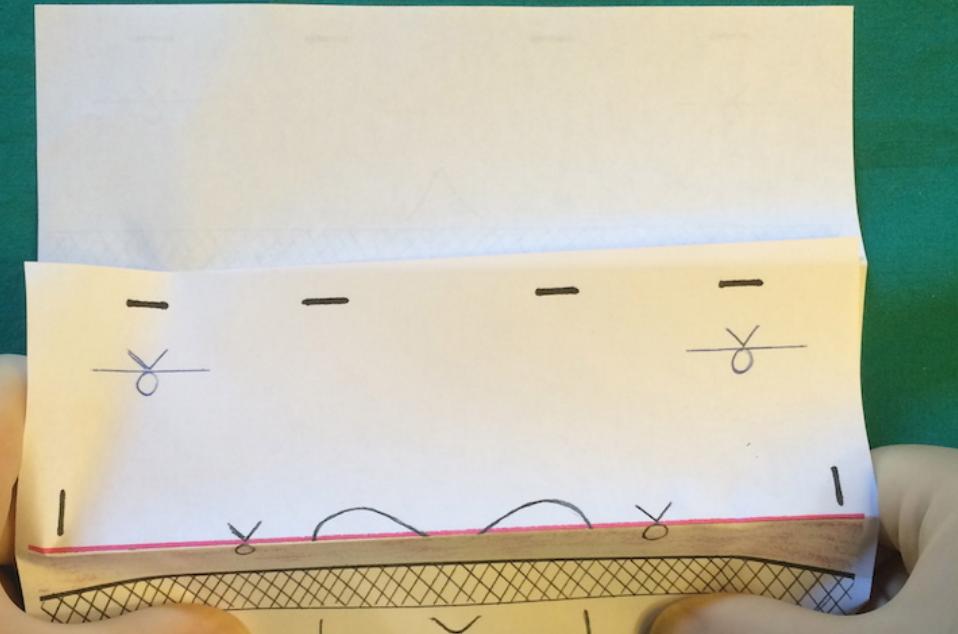


Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

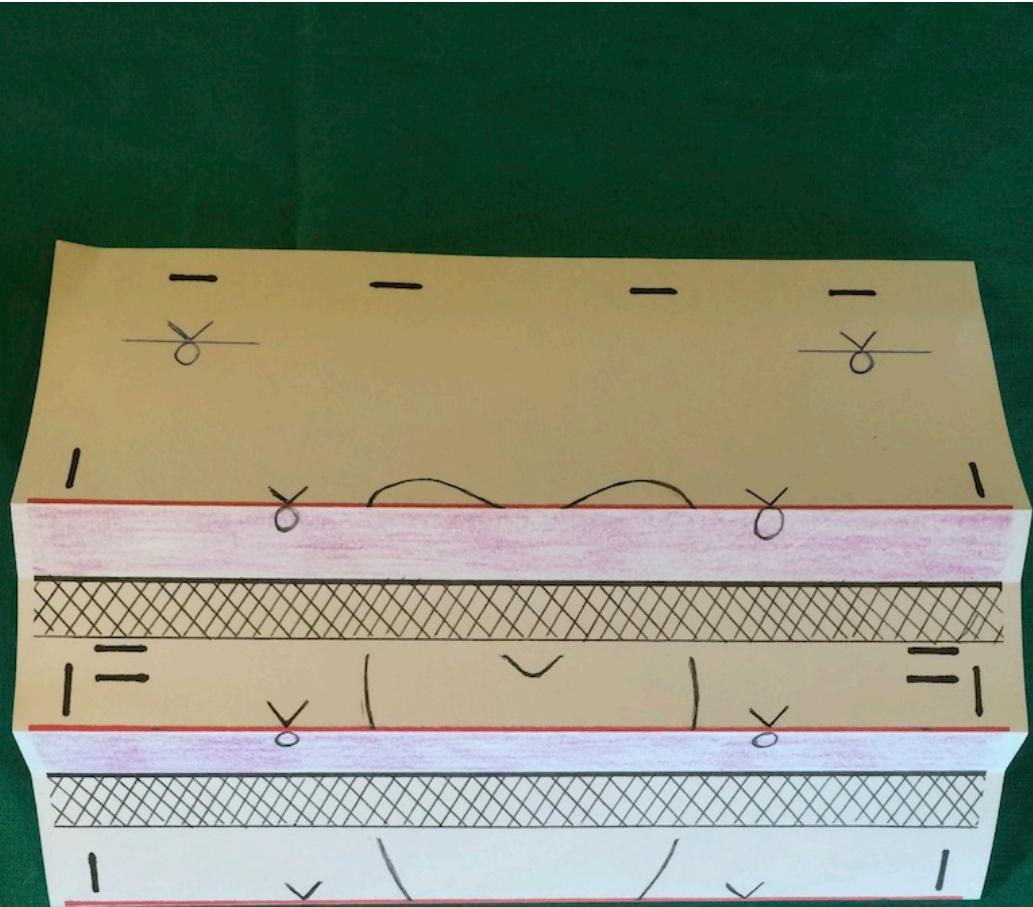



Répéter l'opération
pour marquer le
troisième et le
quatrième pli rouge
(plis montagne)

pas aux
ées par les

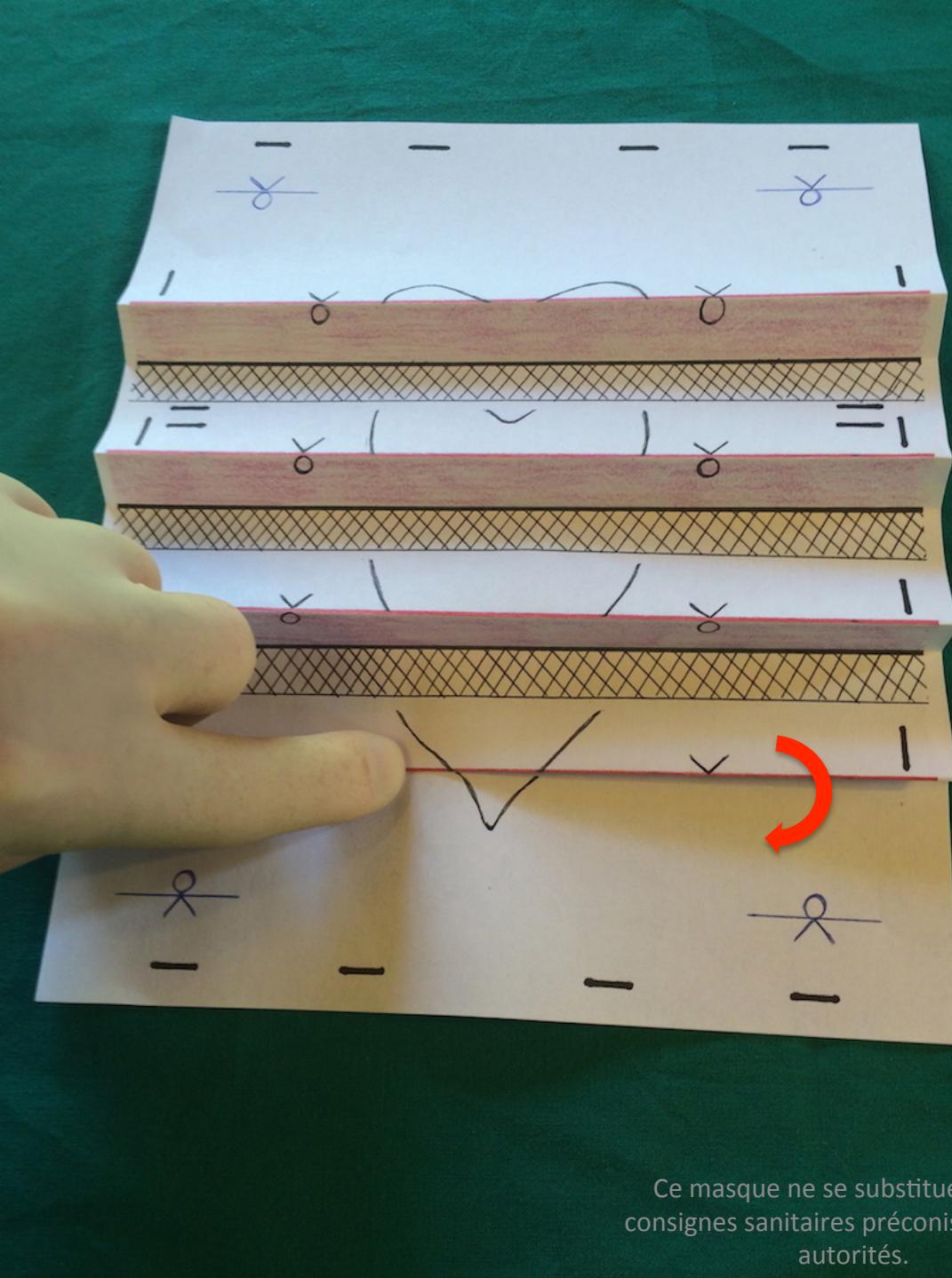


Rabattre la partie rose
du premier pli rouge
sur la partie hachurée

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

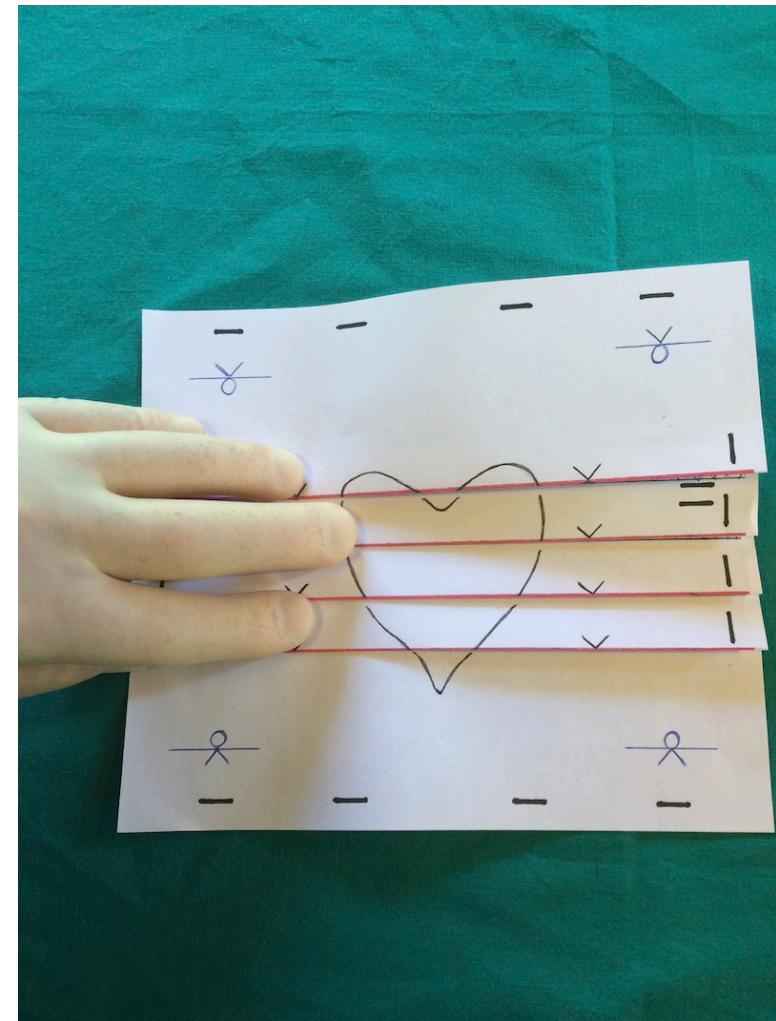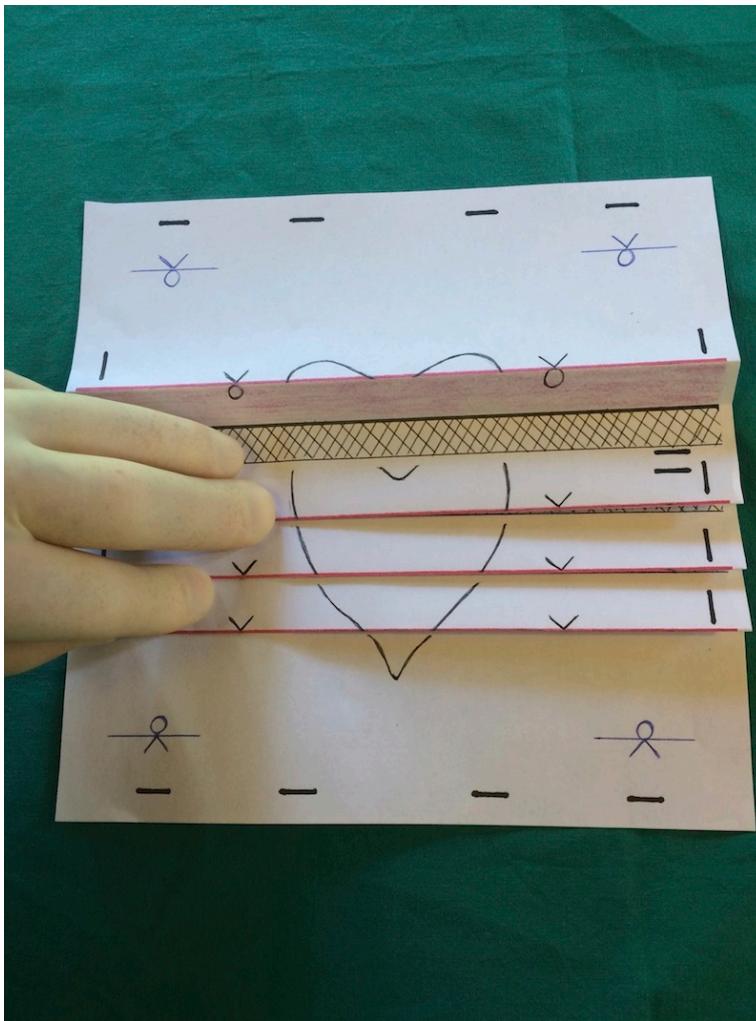


Répéter l'opération pour chaque pli. Un cœur doit progressivement apparaître sur la partie externe du masque

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

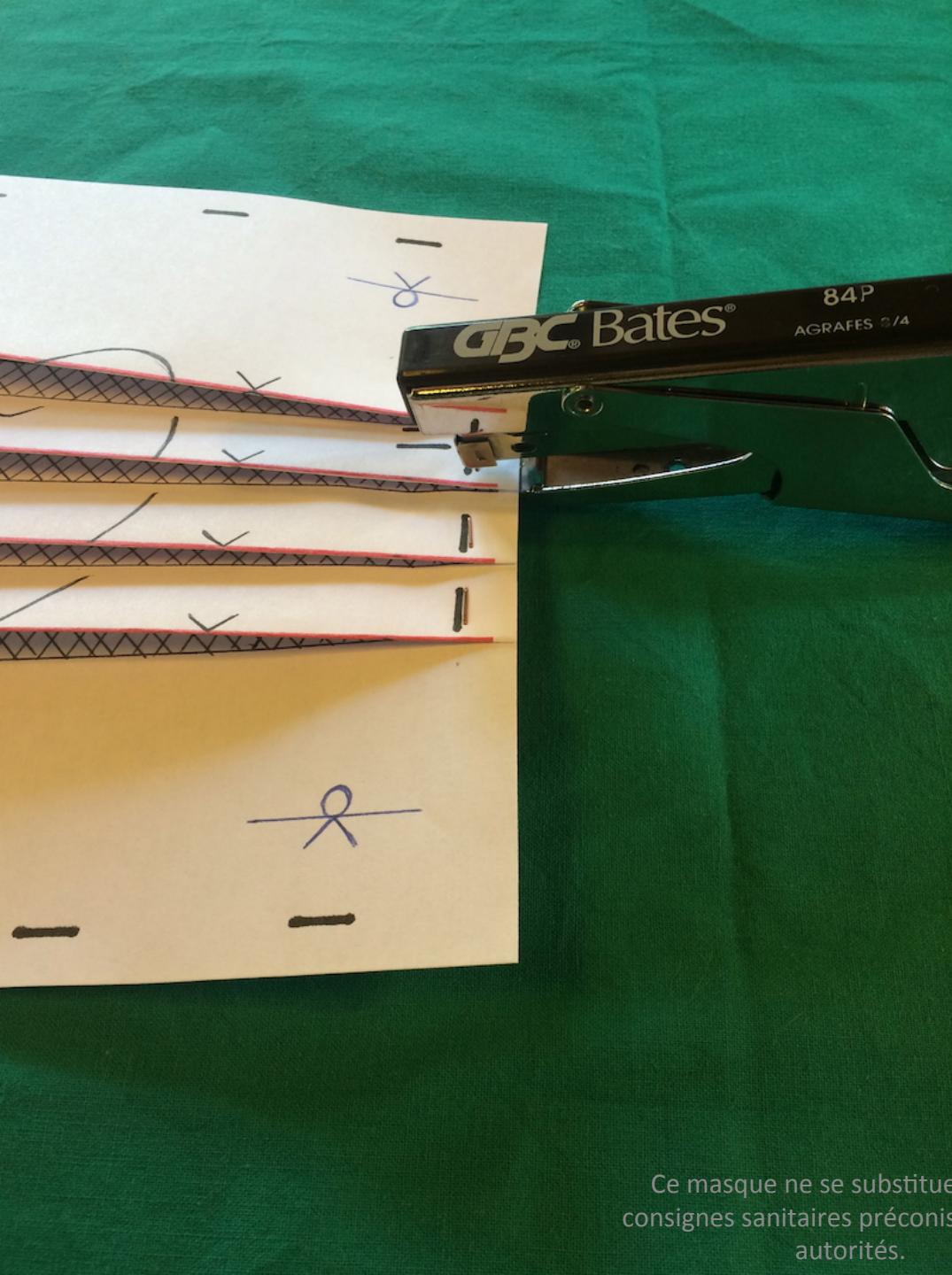


Agrafer latéralement
chaque pli en utilisant
les repères d'agrafe
situés sur la partie droite
du masque

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

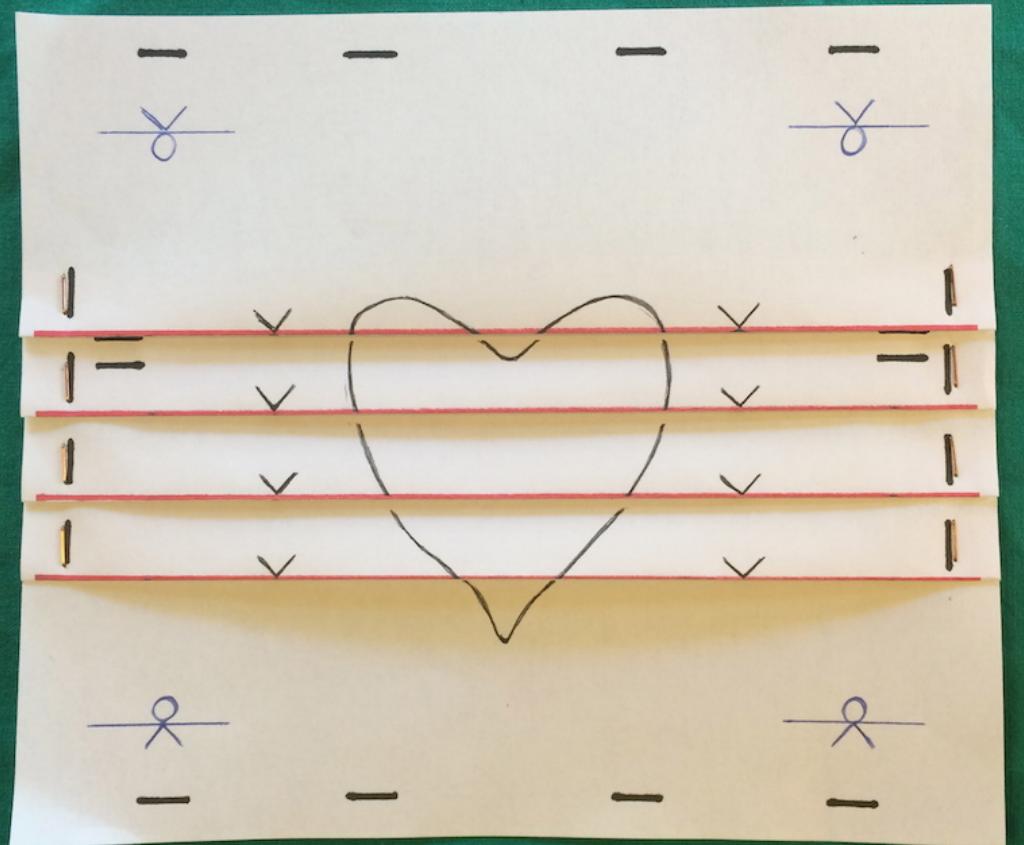


Répéter l'opération sur la partie gauche du masque

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

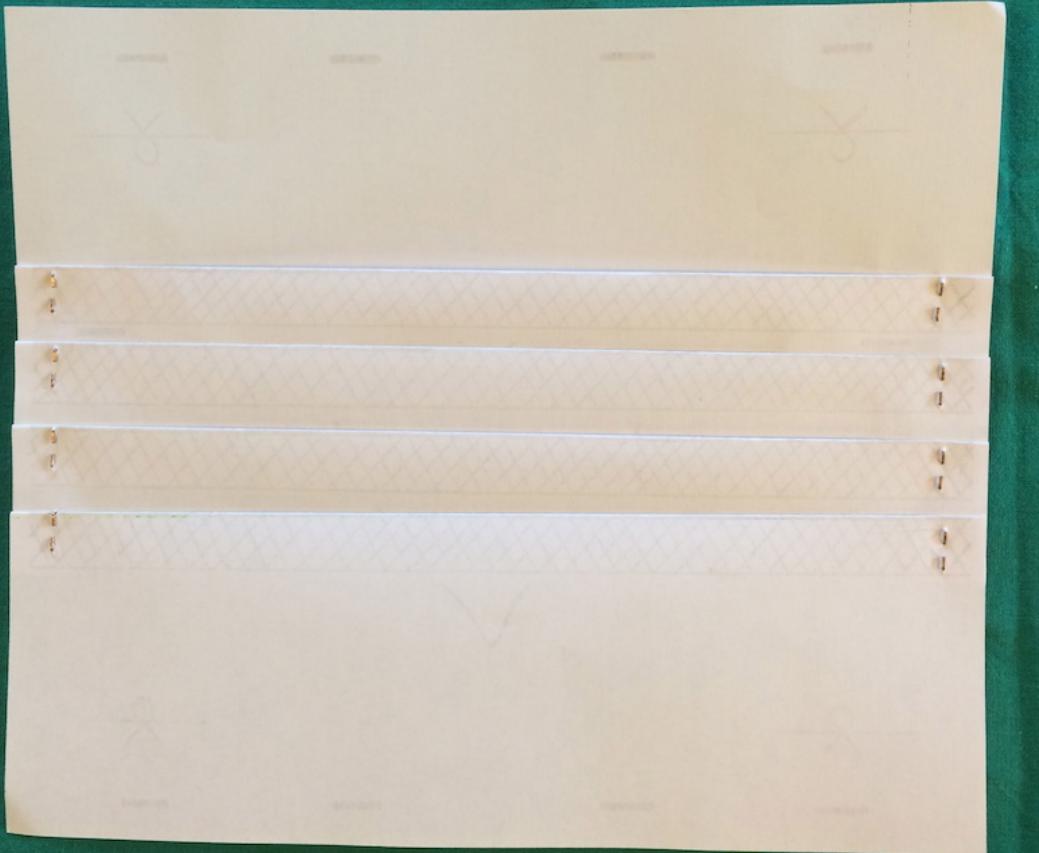

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.


Retourner le masque

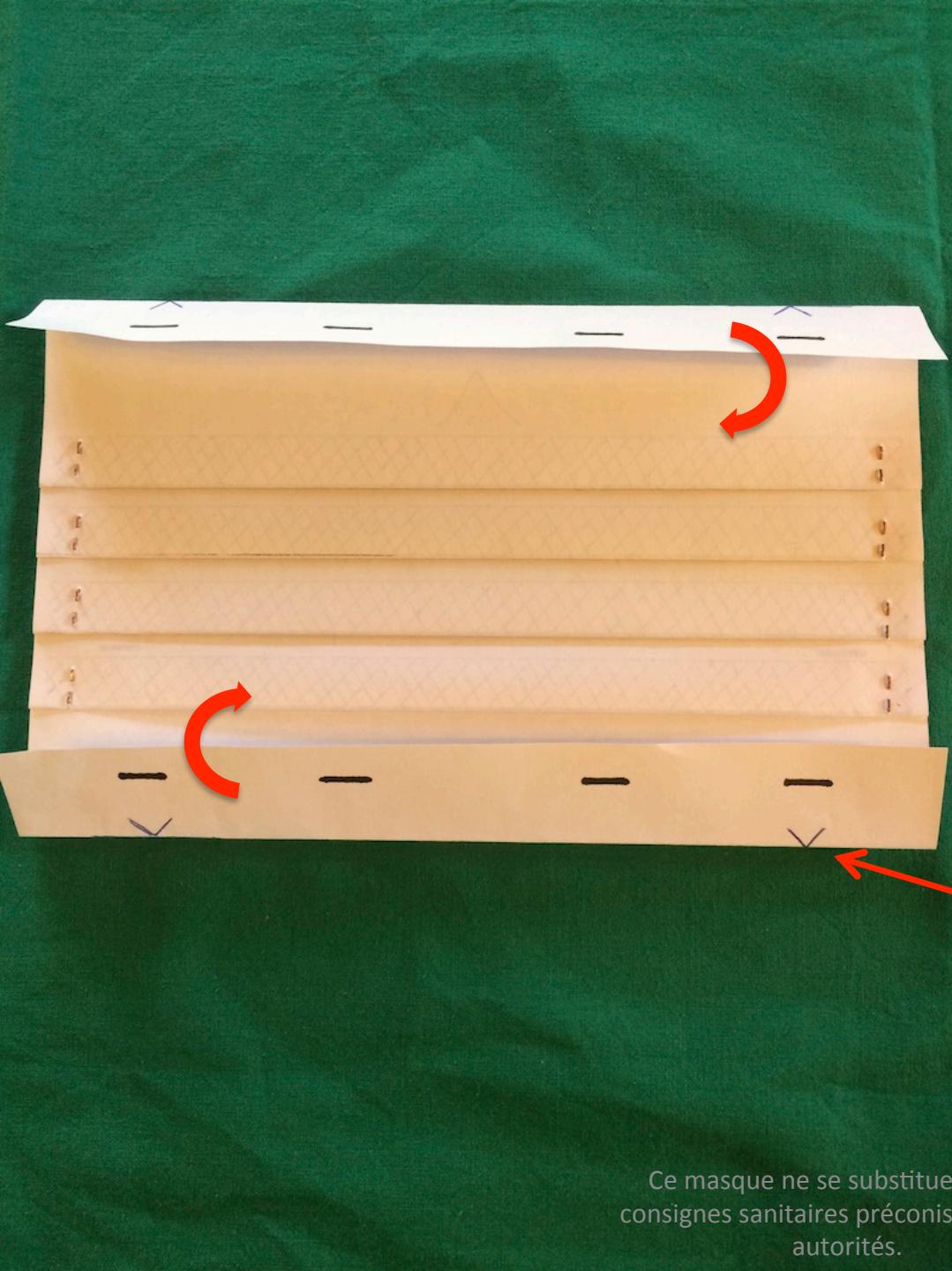

Rabattre la partie supérieure et inférieure du masque à la base des repères de pliage.

Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

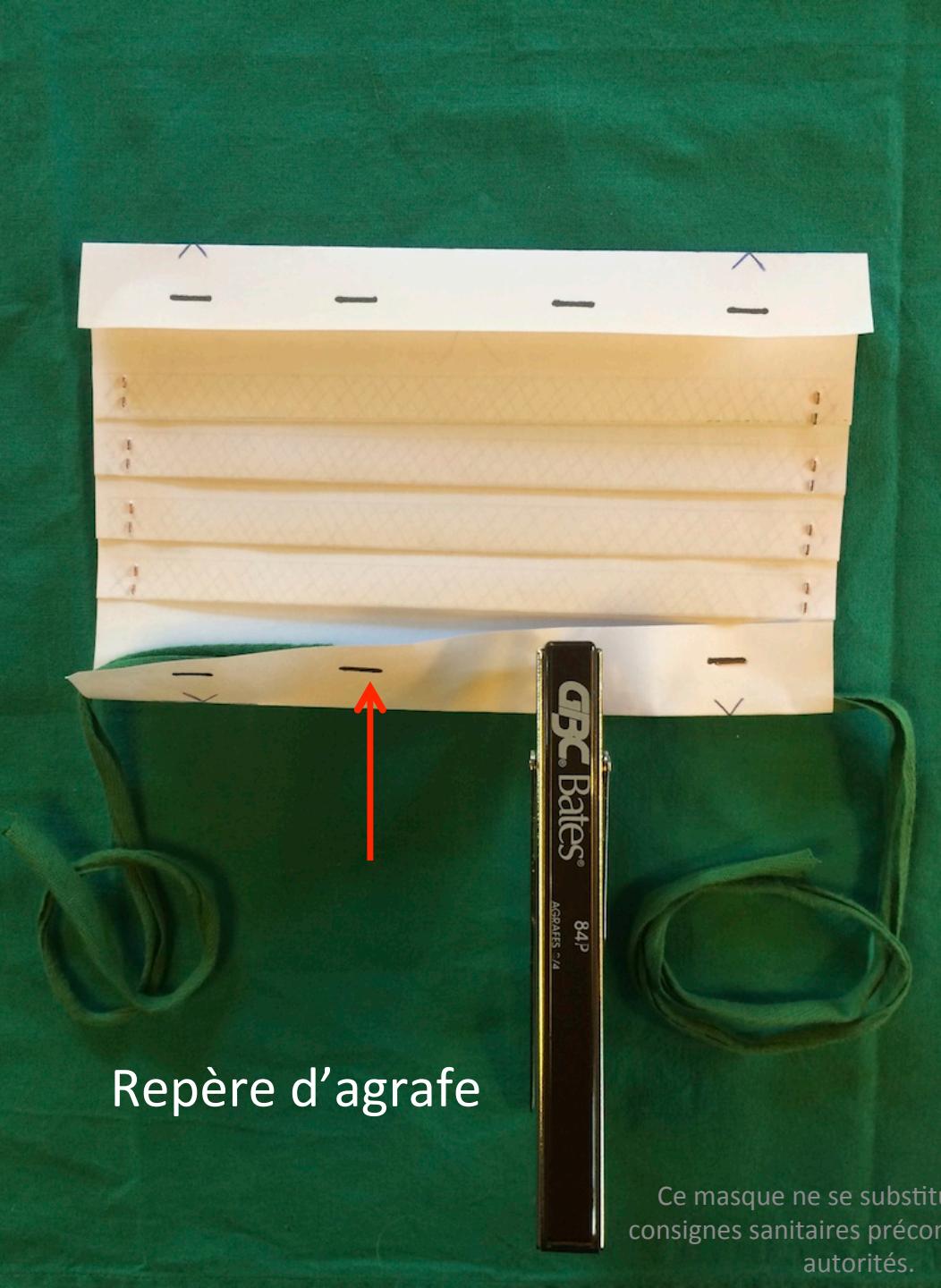


Repère d'agrafe

Positionner le premier lien
à l'intérieur du pli inférieur

Agrafer le pli en suivant les
repères d'agrafe.

Veiller à ne pas positionner d'agrafe sur
les liens afin qu'ils puissent coulisser

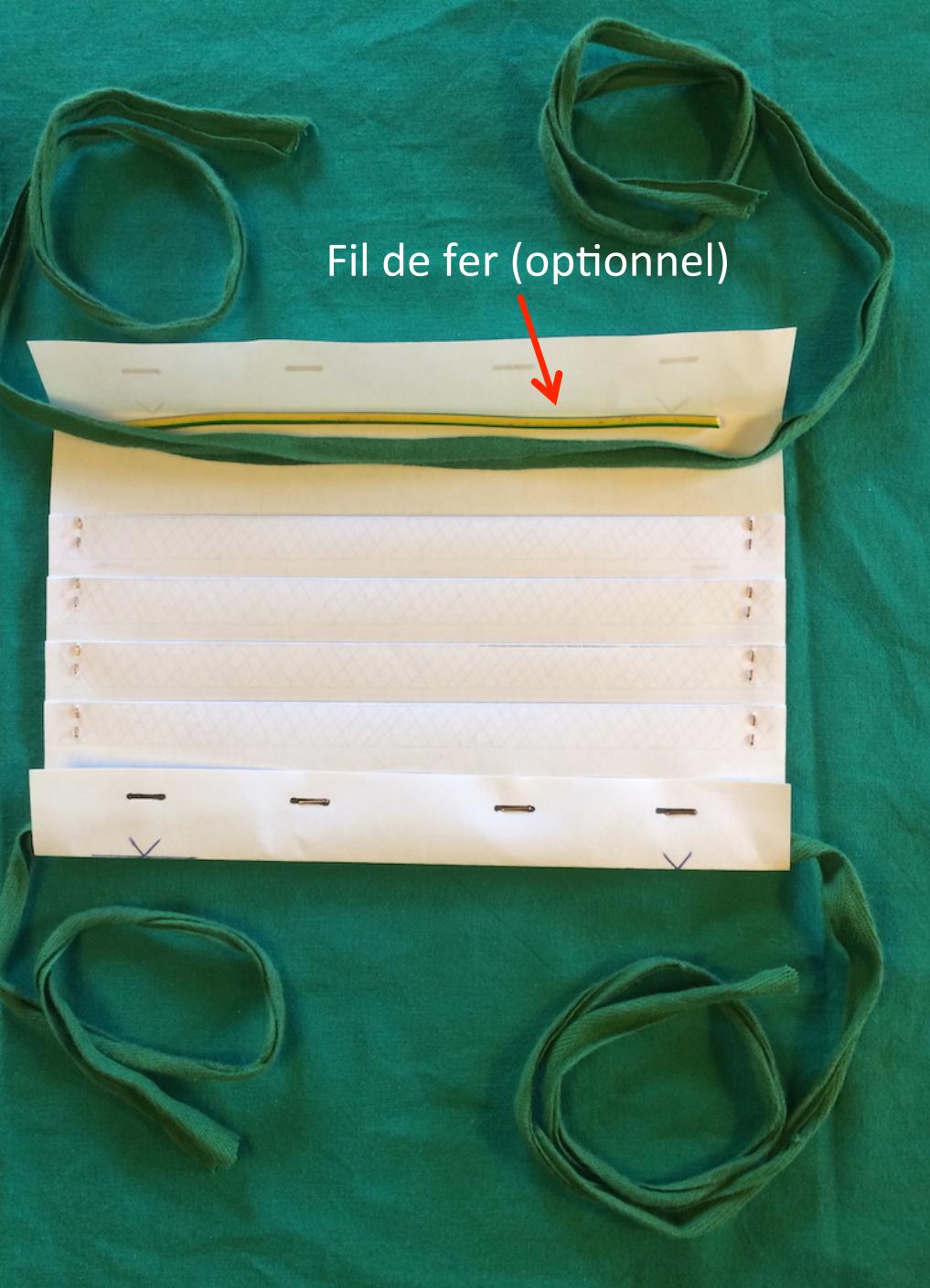


Fil de fer (optionnel)

Positionner le deuxième lien
à l'intérieur du pli supérieur

Agrafer le pli en suivant les
repères d'agrafe.

Optionnel: Insérer le fil de fer dans le pli
supérieur pour réaliser une barette
d'ajustement

tue pas aux
onisées par les

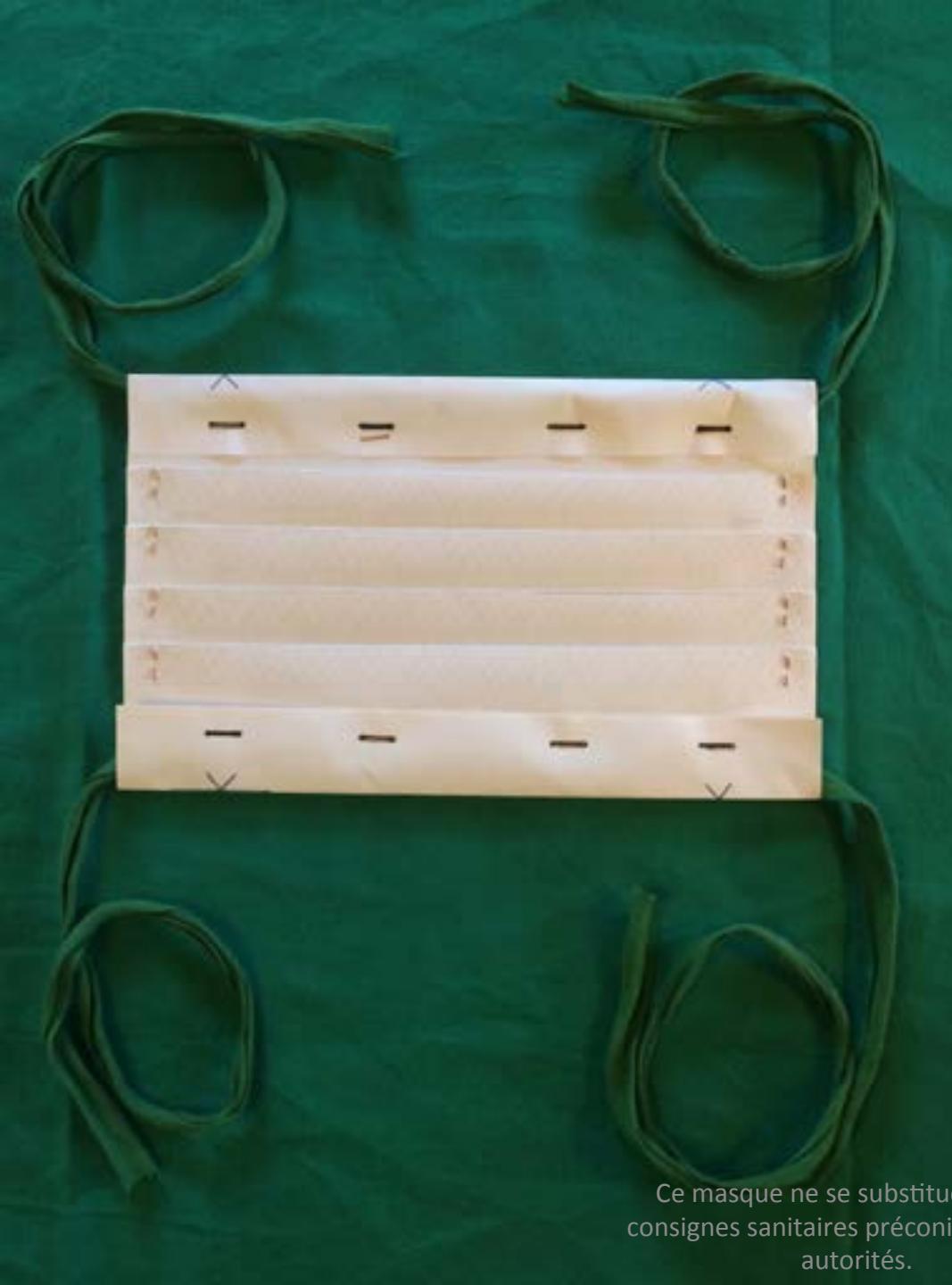



La partie externe du masque est terminée

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

Etape 2:

Réalisation du filtre

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

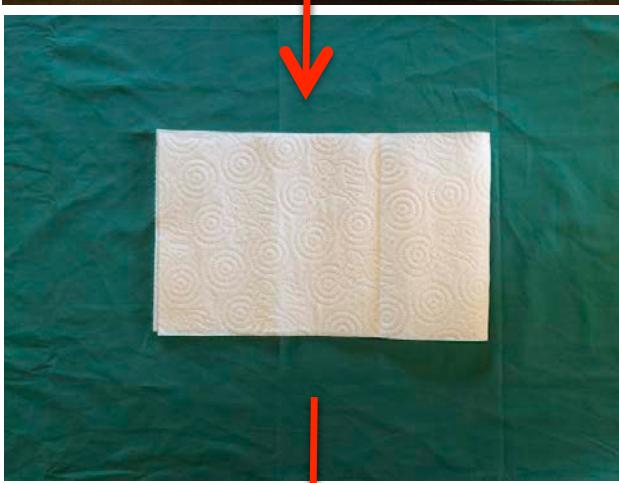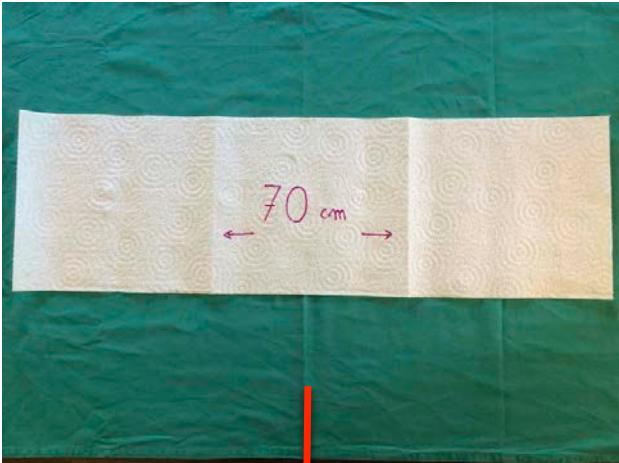


70 cm

Plier en deux une bande de
70 cm de papier essuie-tout


Replier en deux la bande de 35 cm
ainsi obtenue

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

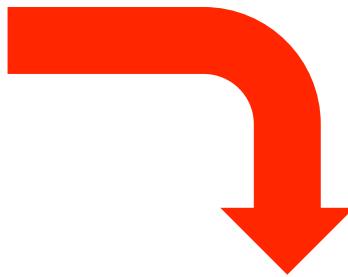


Faire pivoter le filtre de 90 degrés

Ce masque ne se substitue pas
consignes sanitaires préconisées
autorités.

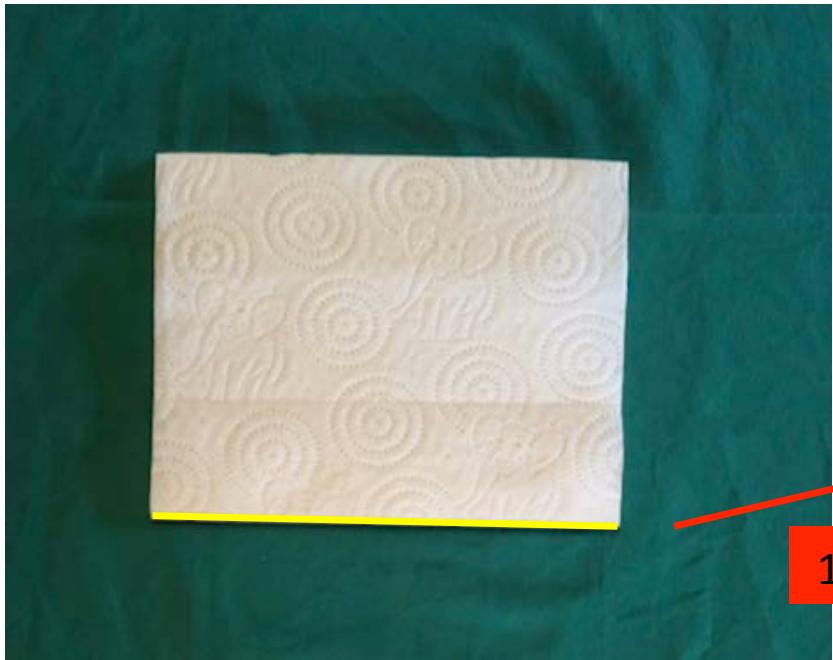

- 1** Positionner le bord inférieur du filtre sur le bord inférieur du masque
- 2** Rabattre le lien de droite sur le filtre pour matérialiser la situation des liens
- 3** Positionner l'agrafeuse au delà du lien et agrafer le filtre

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

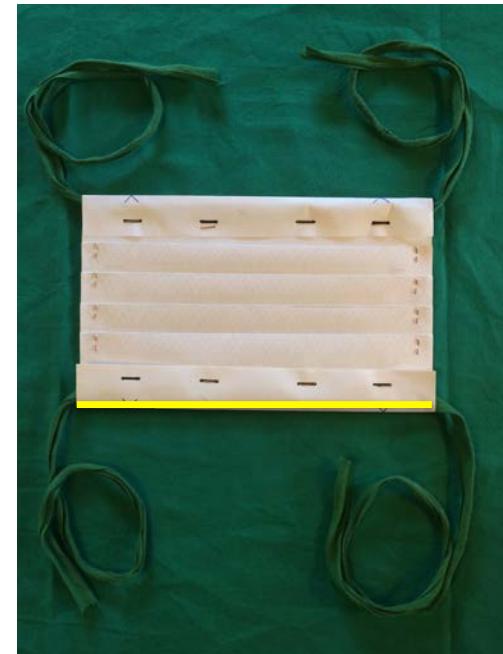



- 1** Positionner le bord supérieur du filtre sur le bord supérieur du masque
- 2** Rabattre le lien de gauche sur le filtre pour matérialiser la situation des liens
- 3** Positionner l'agrafeuse au delà du lien et agrafer le filtre


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.






Déplier délicatement les plis extérieurs du masque
en positionnant le filtre à l'intérieur du masque

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

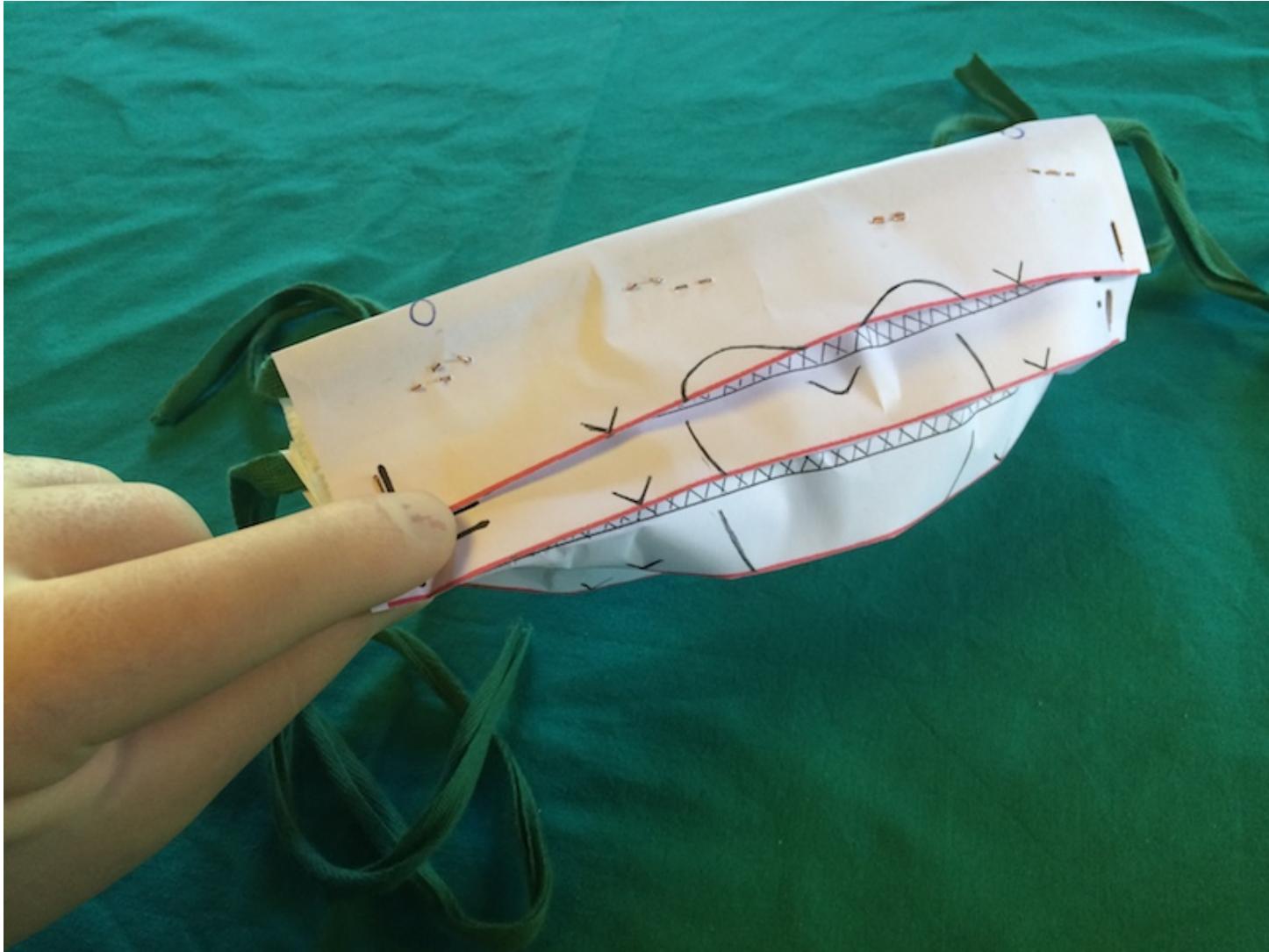

Pincer le bord du masque entre le pouce et
l'index pour former un pli

Ce masque ne se substitue pas aux
consignes sanitaires préconisées par les
autorités.

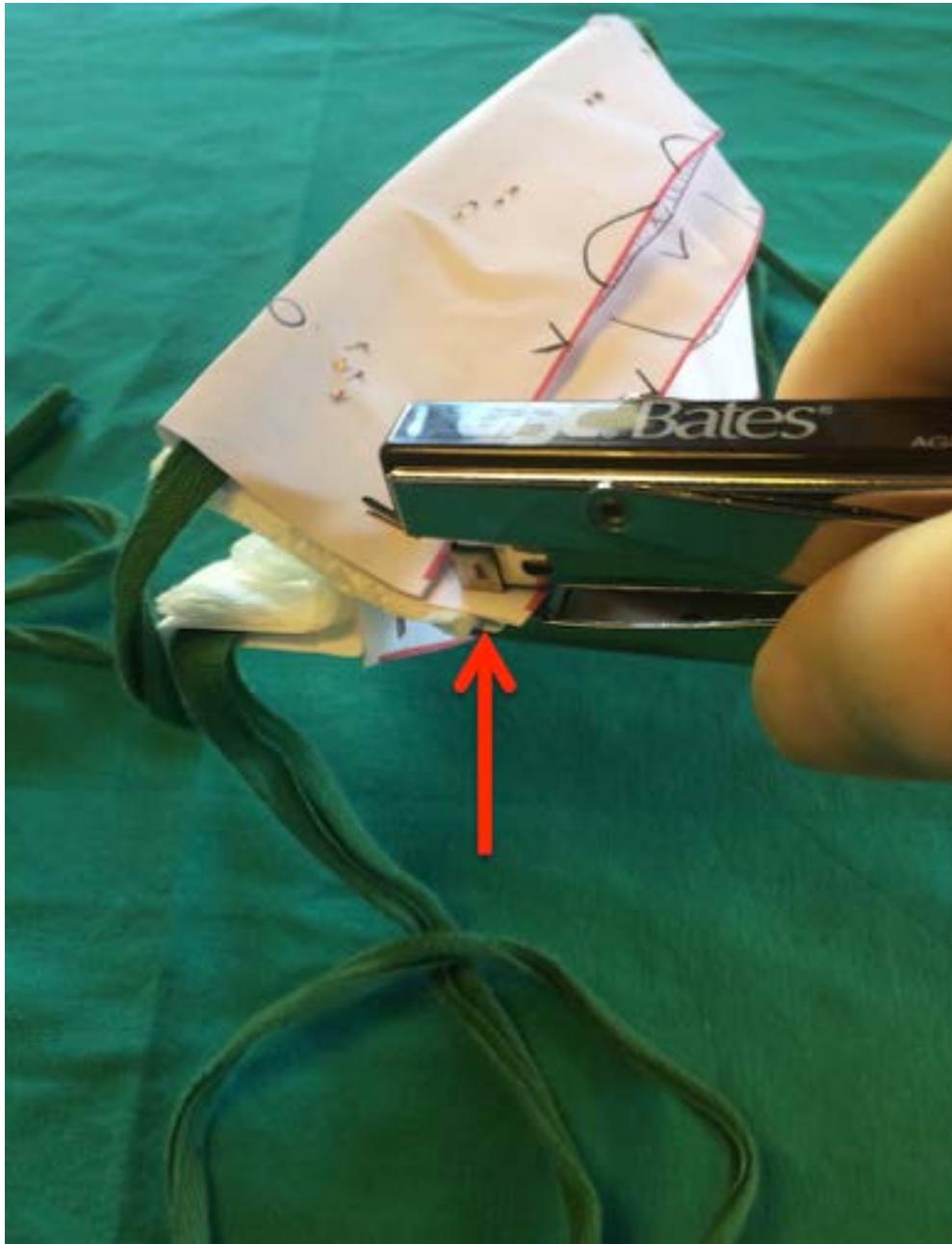

Agrafer le pli ainsi formé sur les repères d'agrafe

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.



Positionner le masque sur le visage, nouer les liens derrière la tête et pincer le bord du masque sur l'arête nasale pour accroître l'étanchéité

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.