

# Fabrication d'un masque de protection en papier



# Masque en papier



- Ce tutoriel décrit les étapes de la fabrication d'un masque de protection en papier.
- Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

# Masque en papier




Aspect extérieur du  
masque



Aspect intérieur du  
masque

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

# Matériel

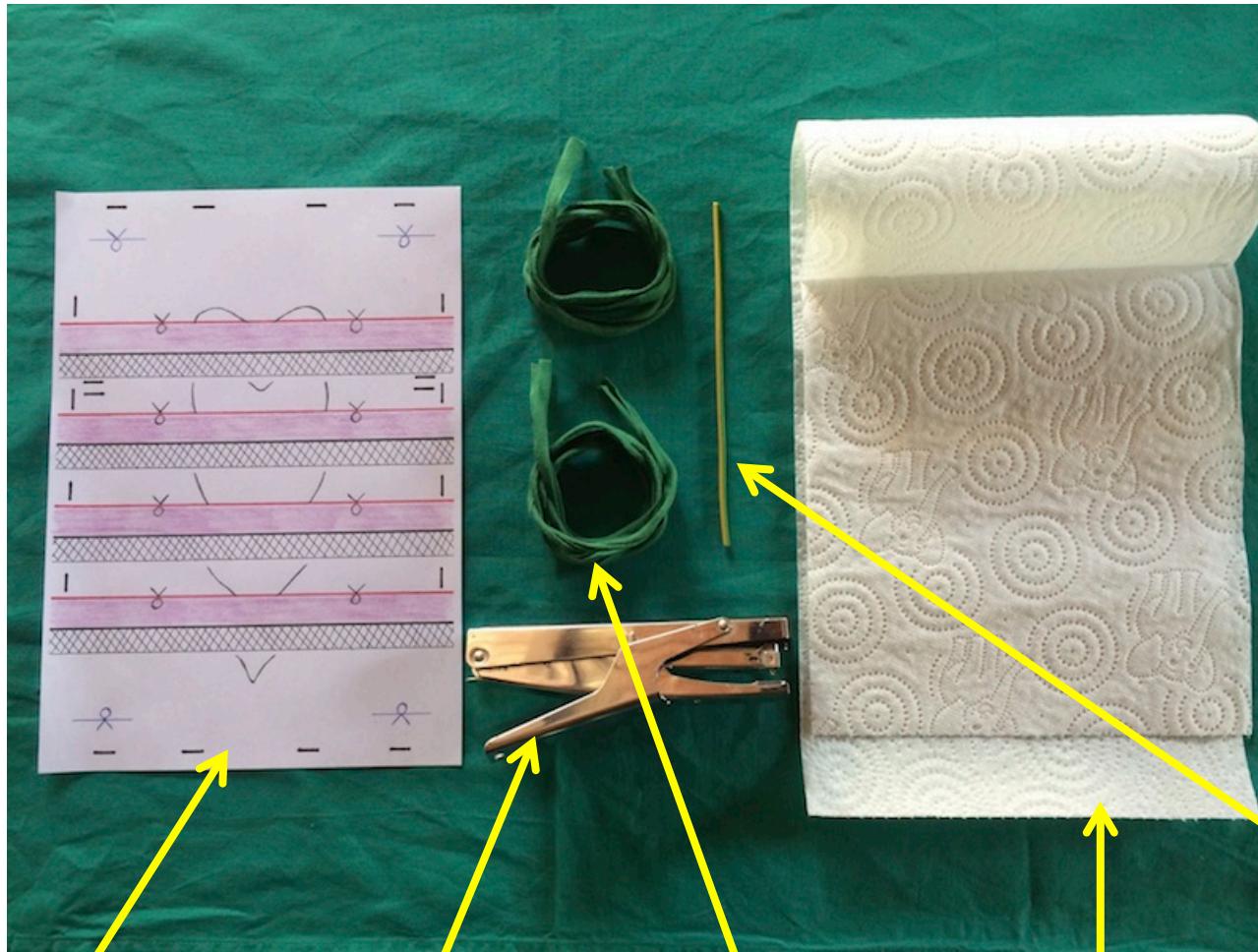

Patron de masque  
Feuille Format A4

Agrafeuse


2 liens  
de 115 cm

70 cm de papier  
essuie-tout

(optionnel)  
10 cm de fil  
de fer  
recouvert  
de ruban  
adhésif

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.


# Patron (format A4)

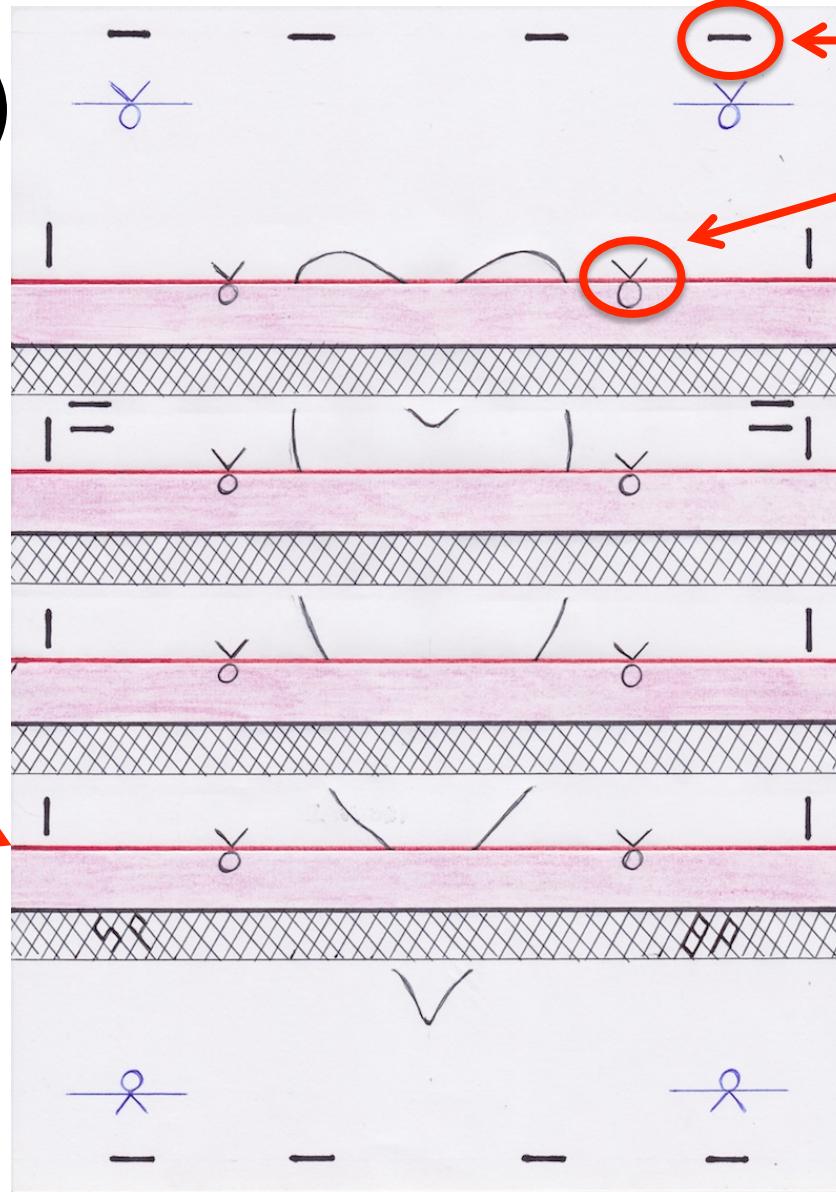

Trait de pliage  
rouge  
(pli montagne)


Repère d'agrafe  
Repère de pliage

Trait de  
pliage noir  
(pli vallée)

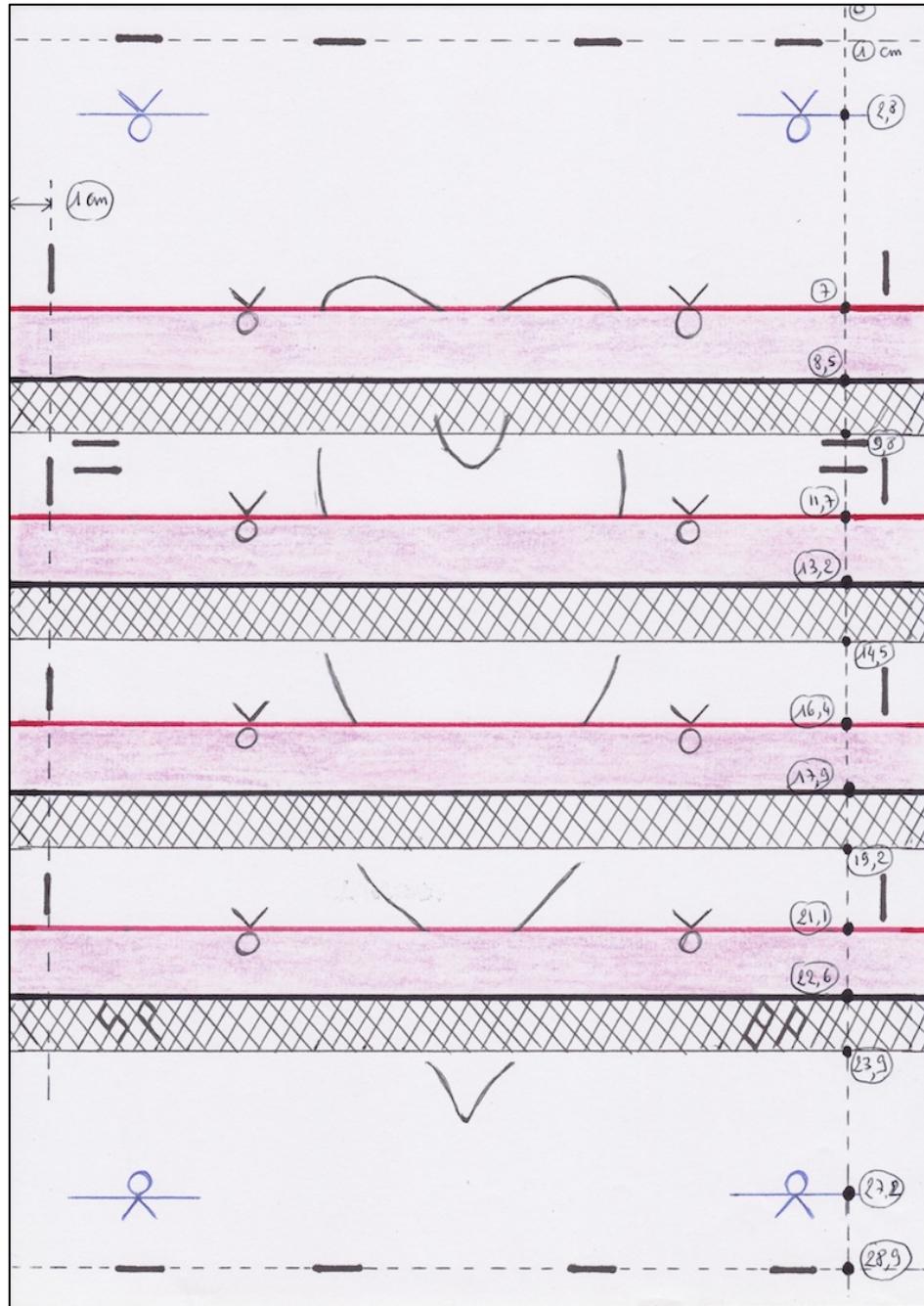

## Patron Masque Homme

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

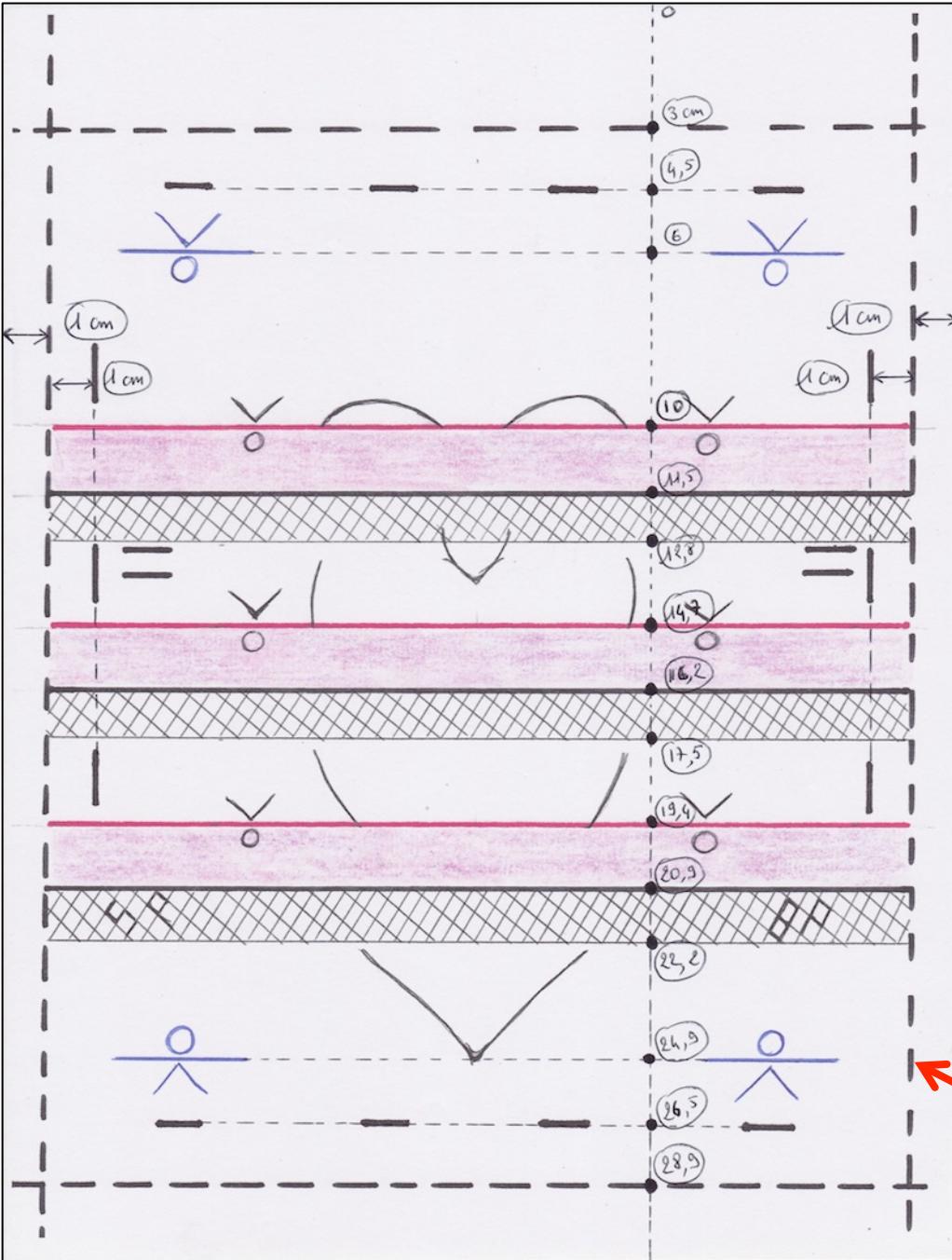

## Patron Masque Femme


(Découper le long des pointillés)

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

## Etape 1:

# Réalisation de la partie externe du masque


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

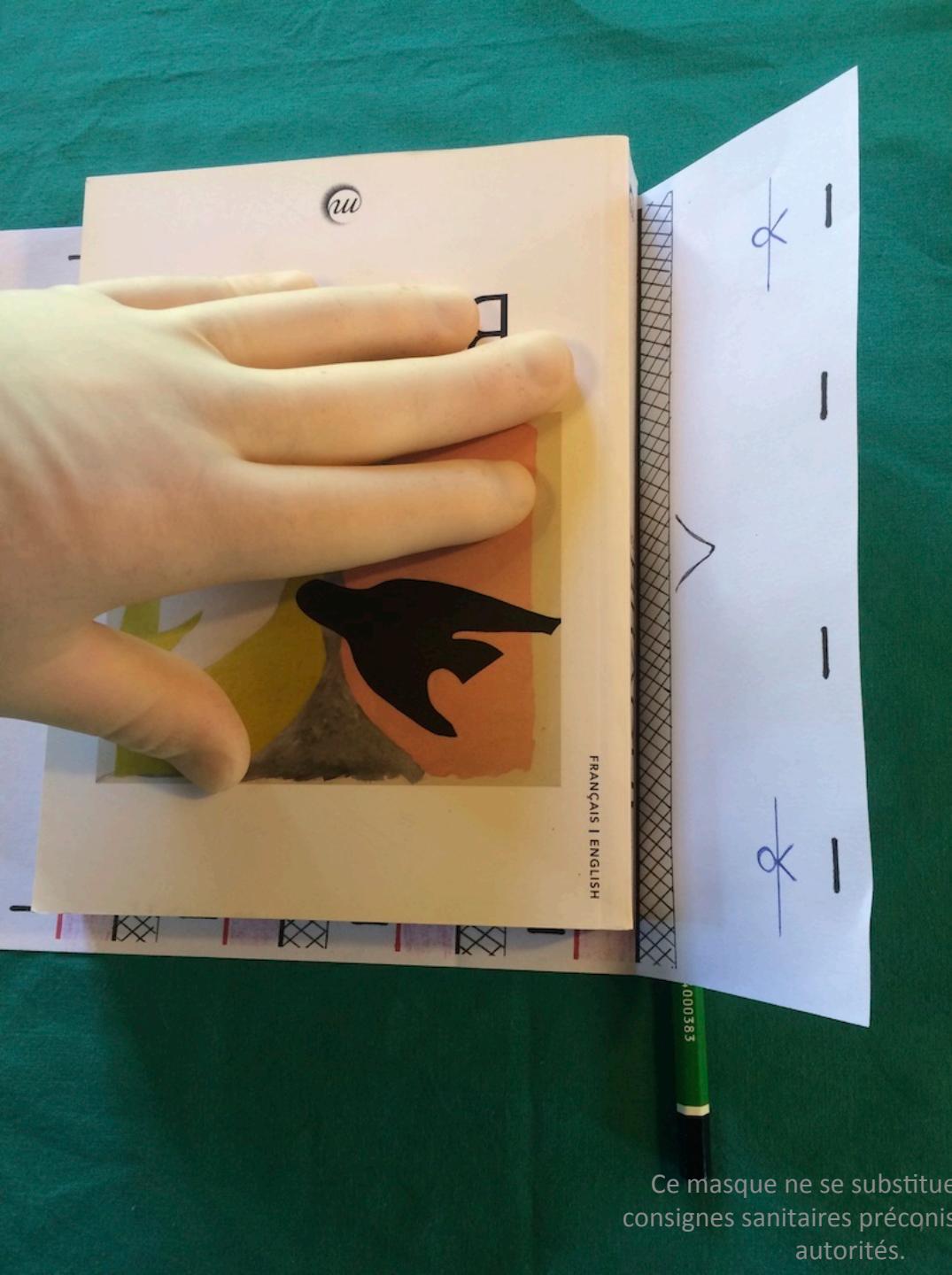

# Marquage du 1er pli noir


Positionner une règle  
ou le bord d'un livre  
sur le premier trait de  
pliage noir

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

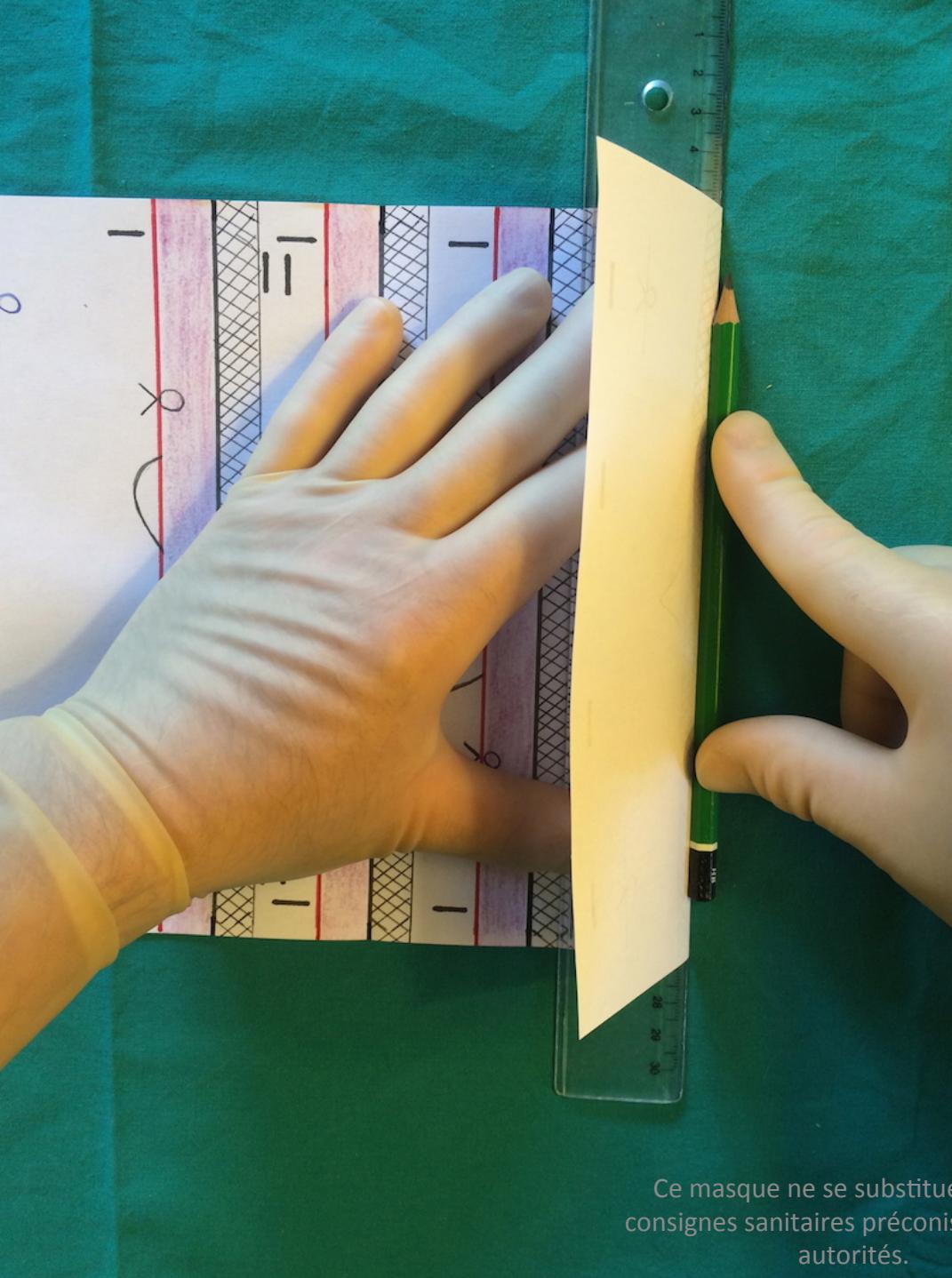

Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le premier pli


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

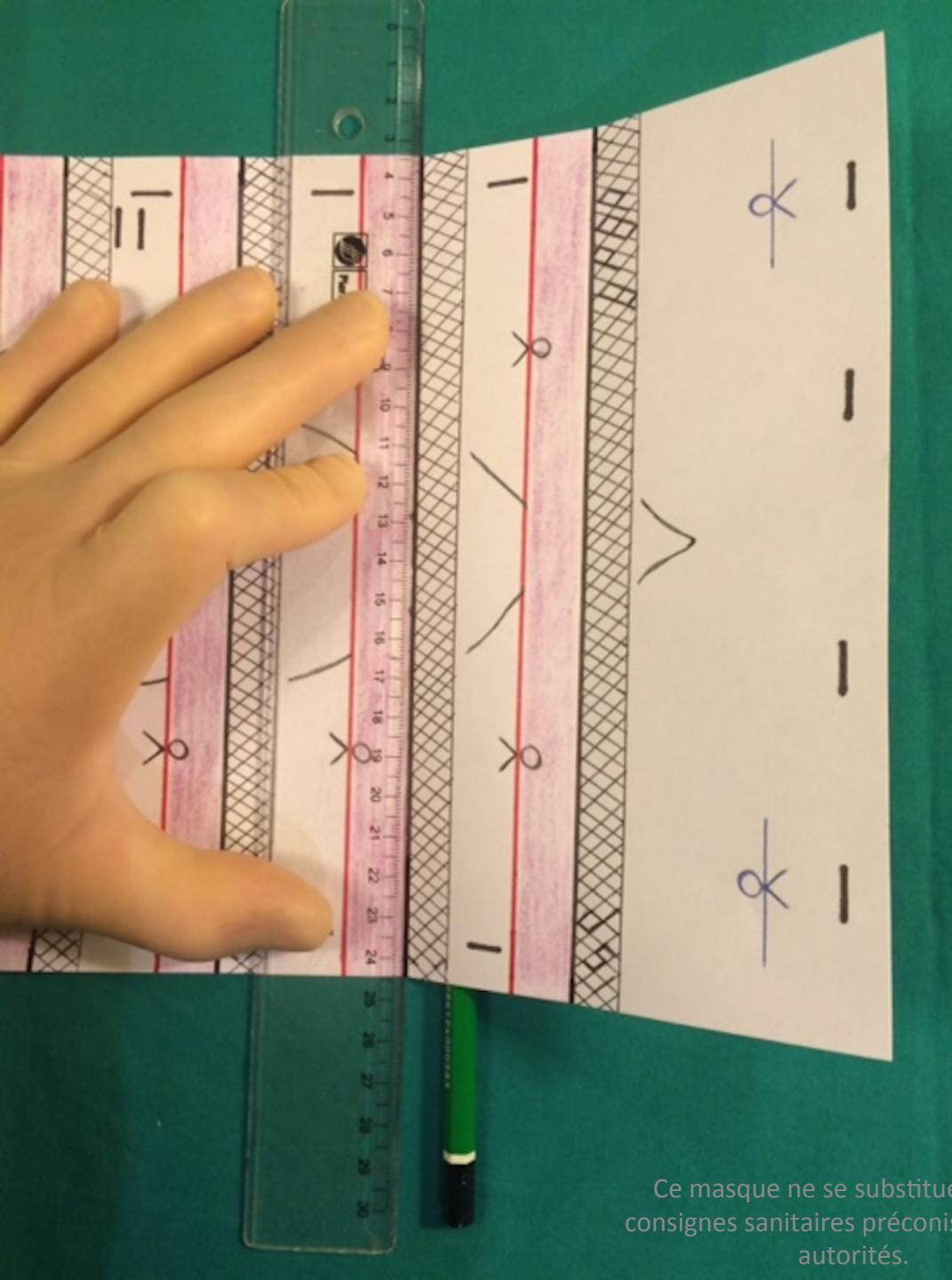

## Marquage du 2ème pli noir

Positionner une règle  
ou le bord d'un livre  
sur le deuxième trait  
de pliage noir

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

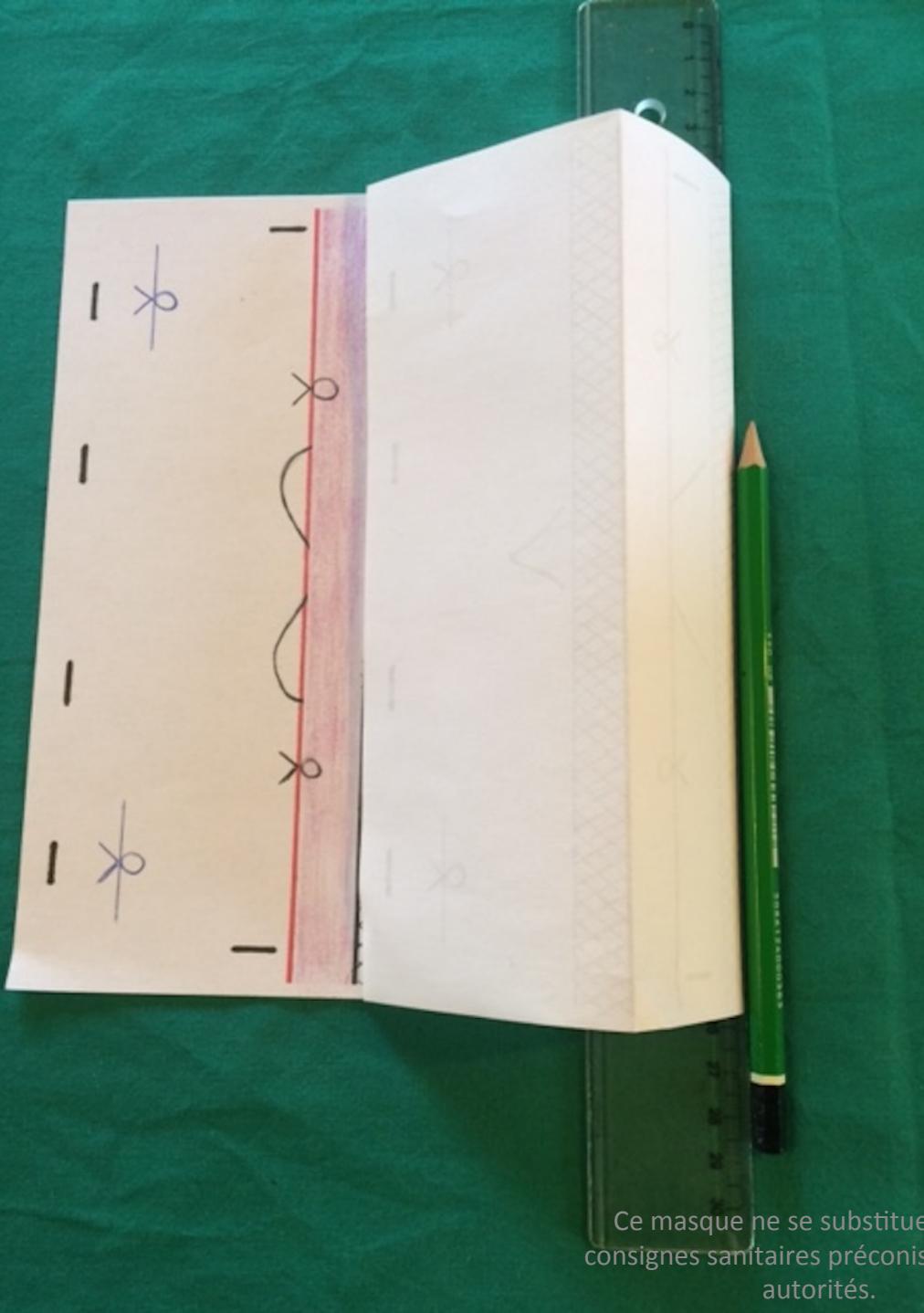


Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le deuxième pli


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

# Marquage du 3ème pli noir

Positionner une règle  
ou le bord d'un livre  
sur le troisième trait  
de pliage noir

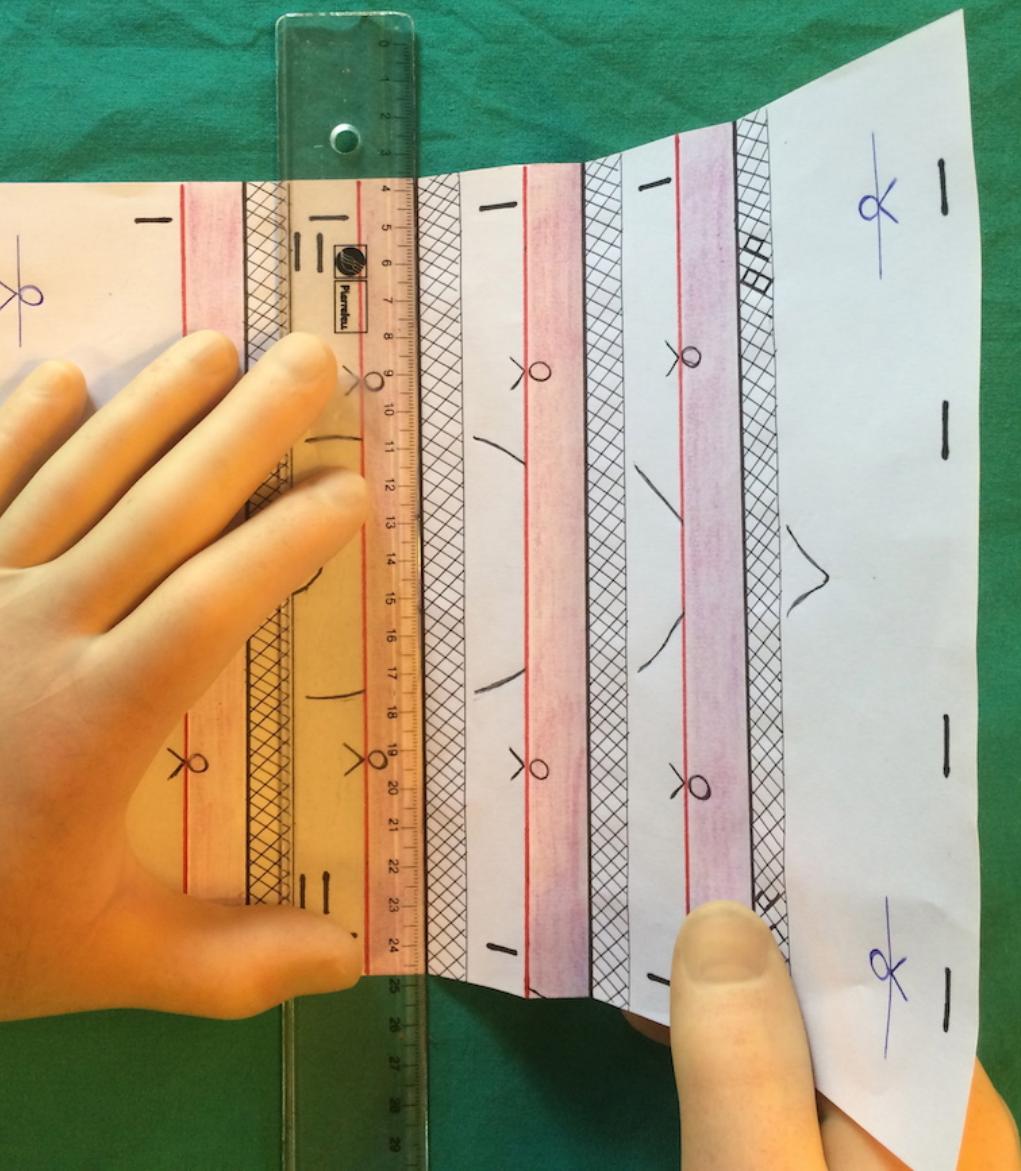


itue pas aux  
onisées par les

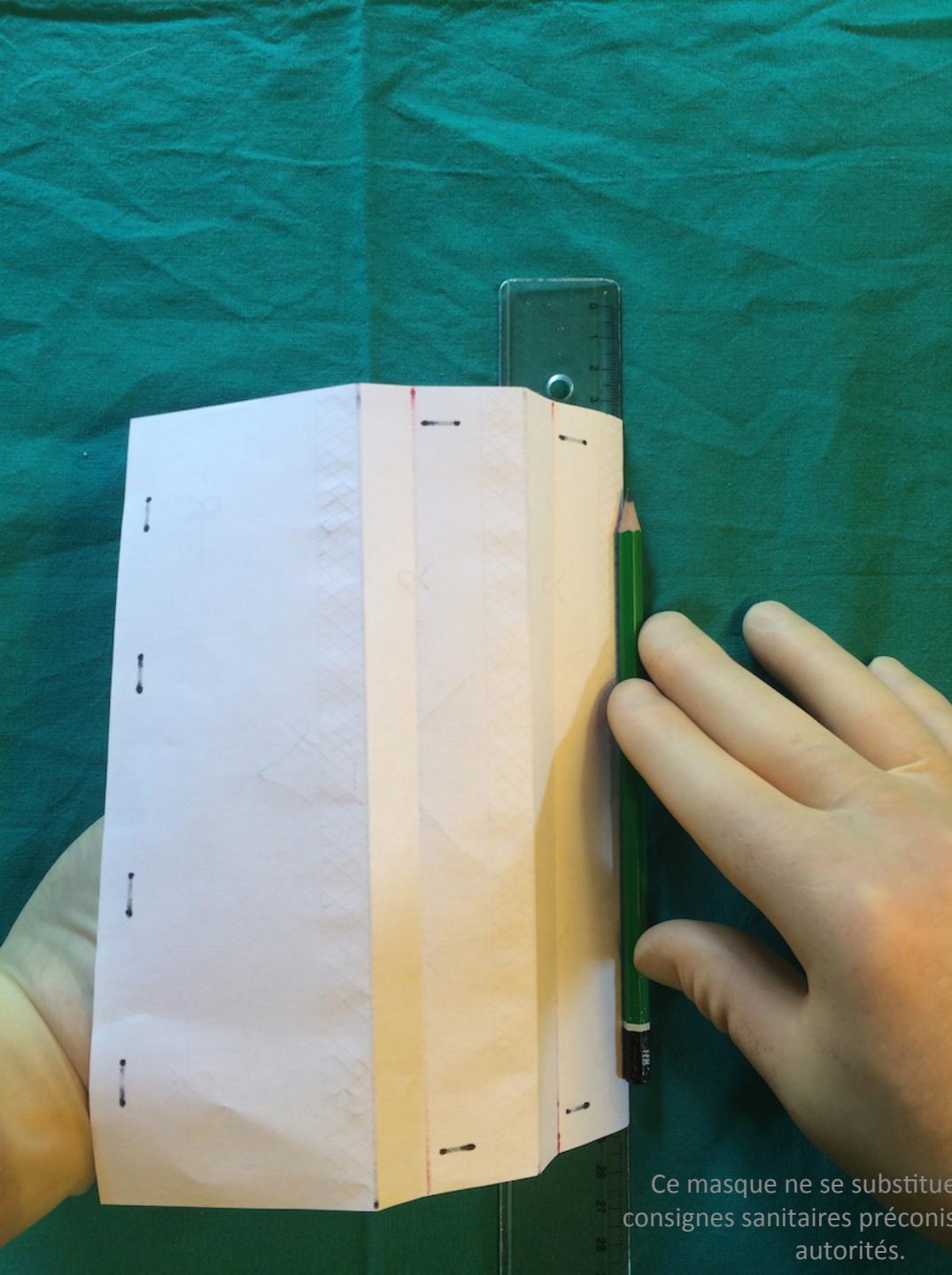

Utiliser un crayon au verso du patron pour accentuer le troisième pli

Répéter l'opération pour marquer le quatrième pli

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

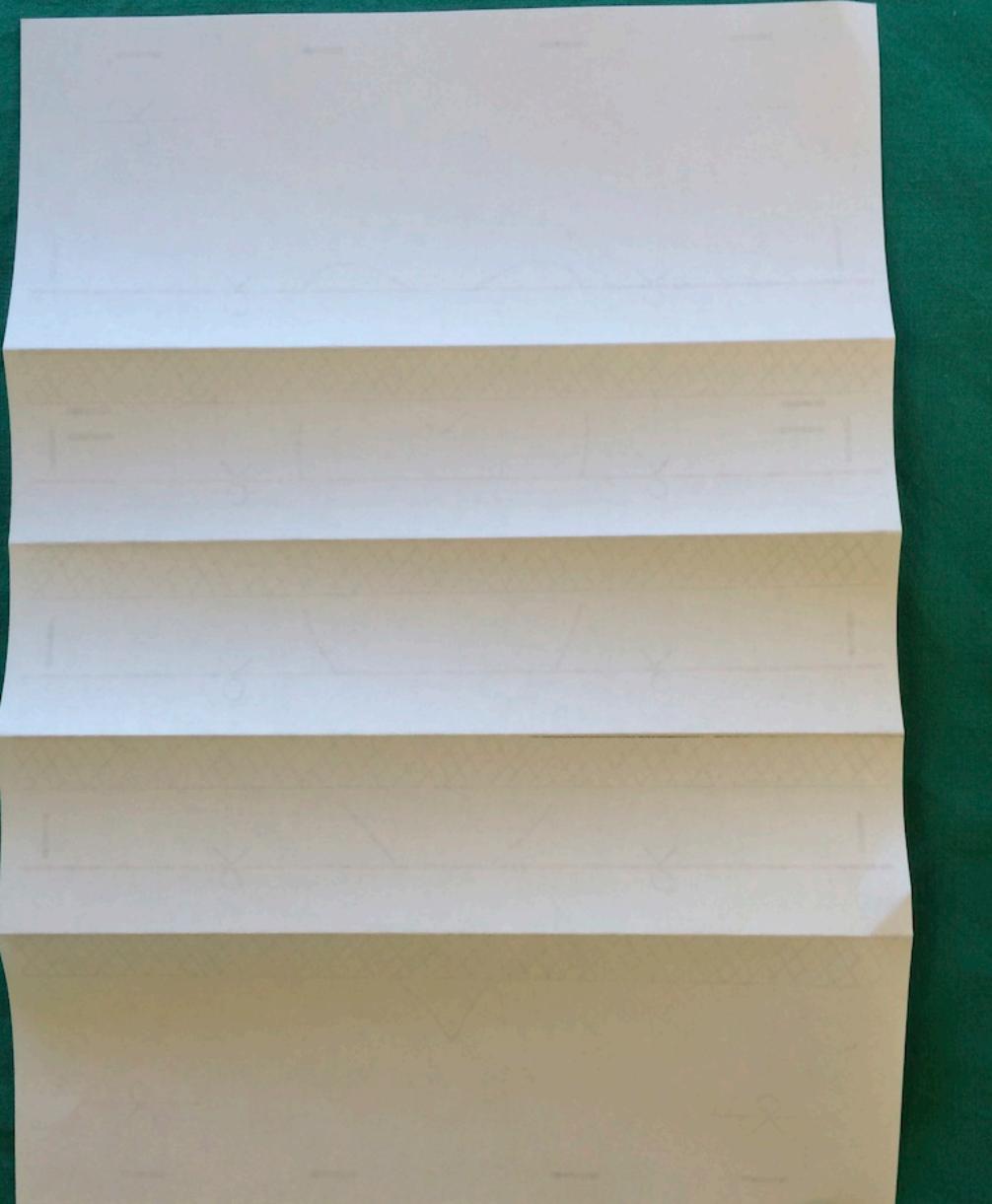

Résultat du  
marquage des  
quatre plis noirs  
(plis vallée)


(verso)

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

# Marquage du 1er pli rouge

Réaliser le premier pli rouge le long du premier trait rouge.


Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

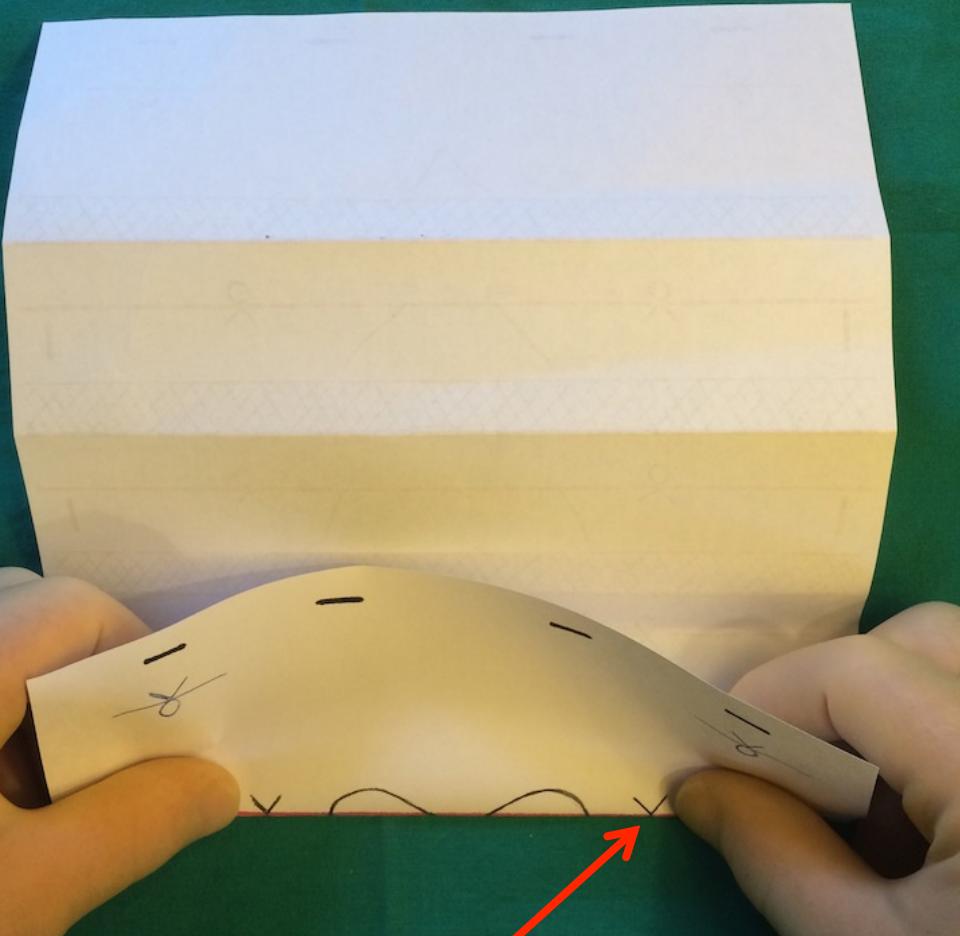


Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

# Marquage du 2ème pli rouge

Réaliser le deuxième pli rouge le long du deuxième trait rouge.  
Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

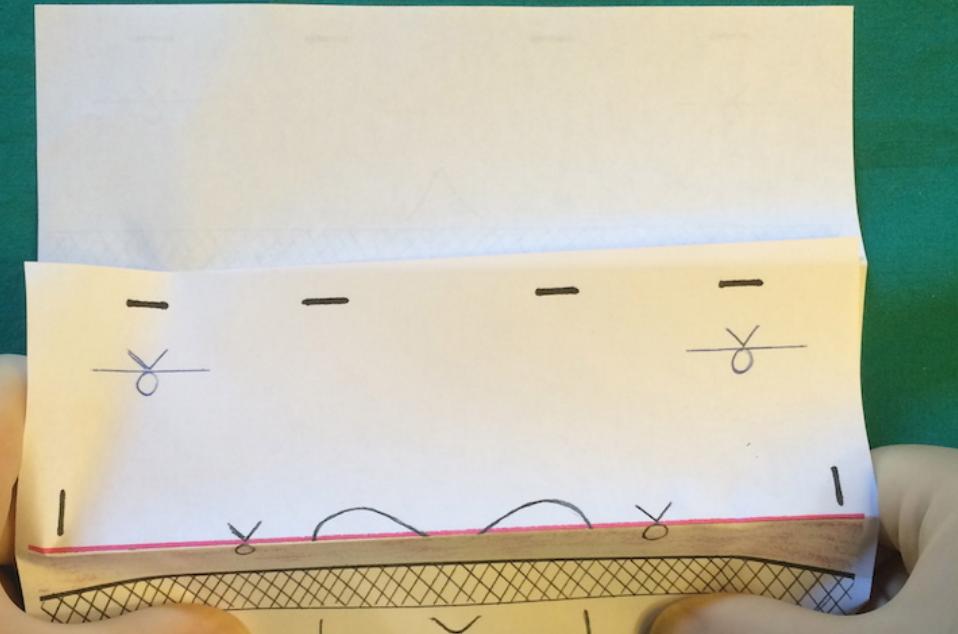


Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

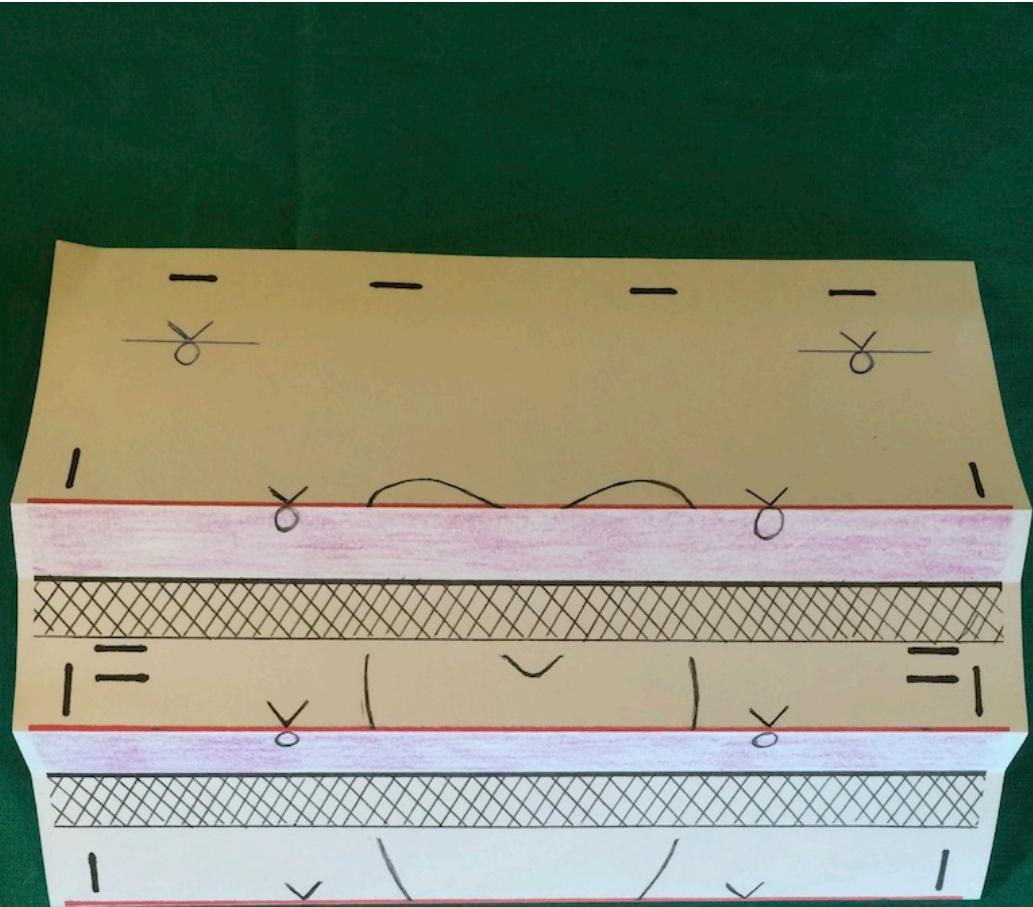



Répéter l'opération  
pour marquer le  
troisième et le  
quatrième pli rouge  
(plis montagne)

pas aux  
ées par les

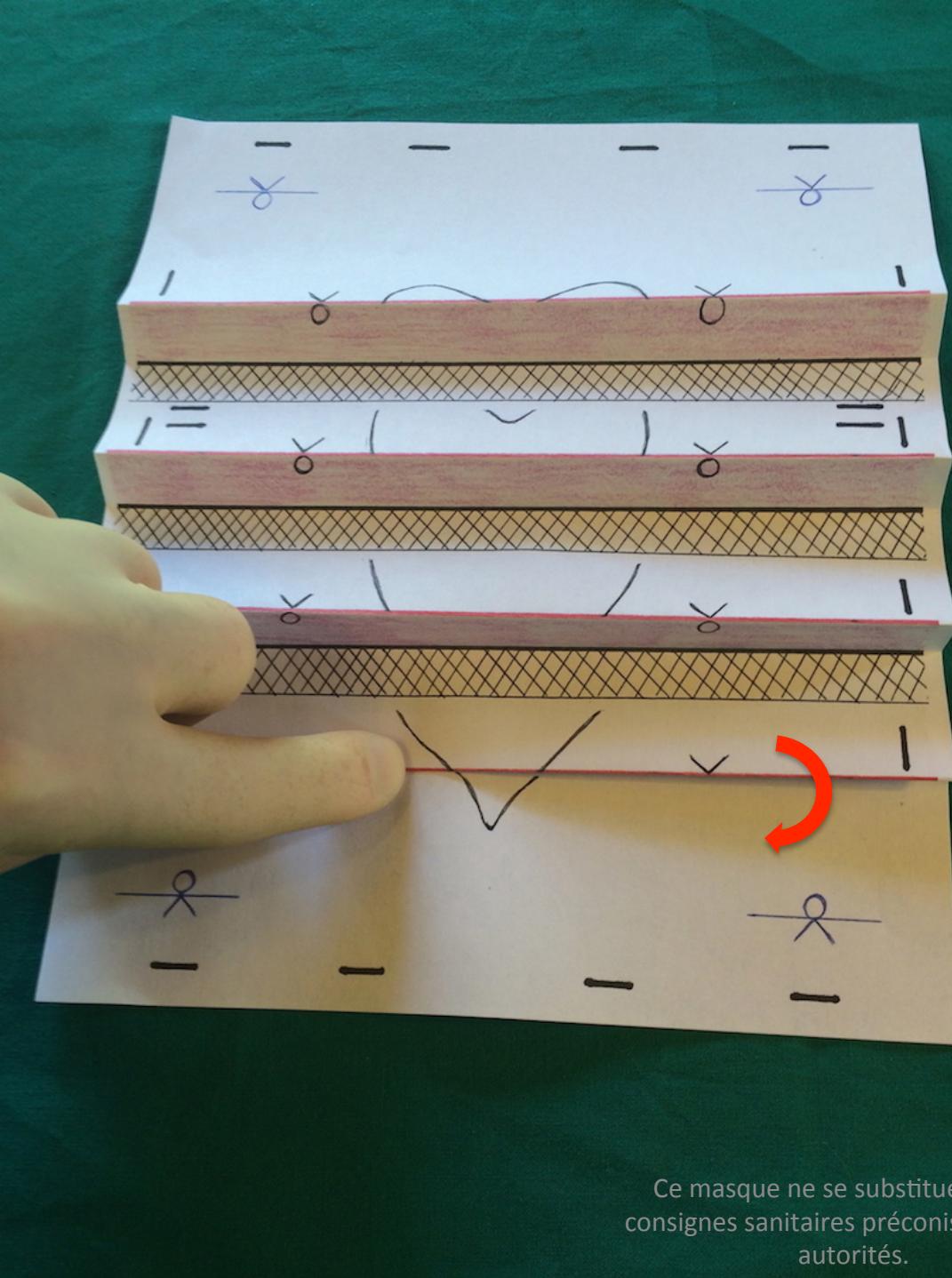


Rabattre la partie rose  
du premier pli rouge  
sur la partie hachurée

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

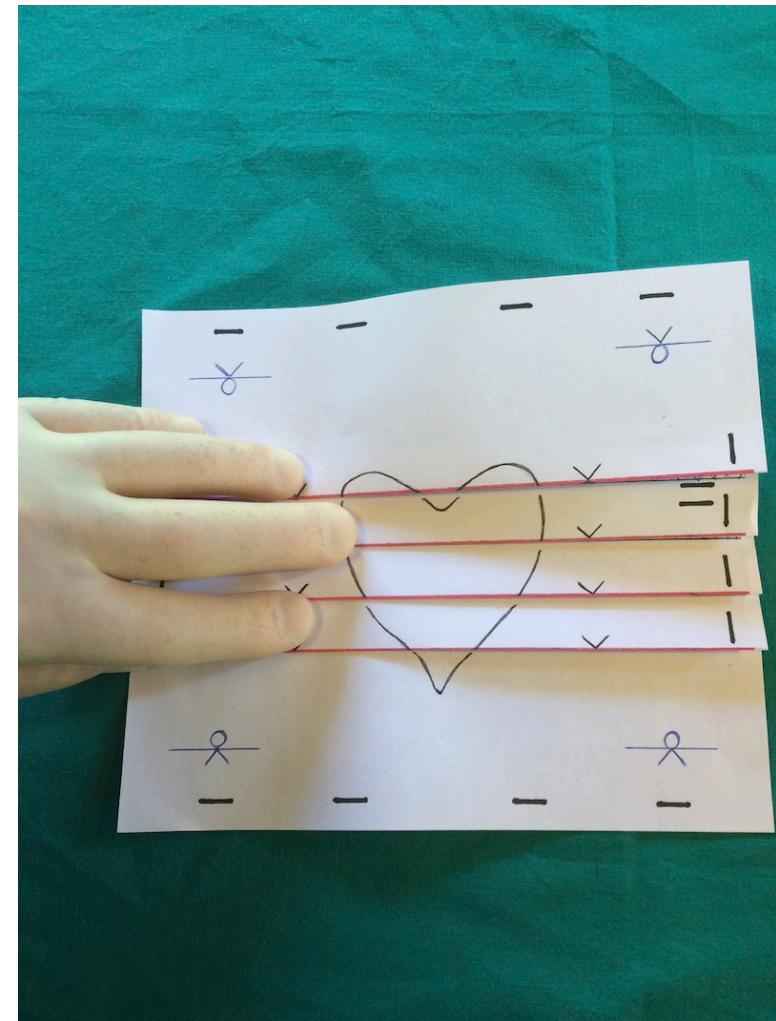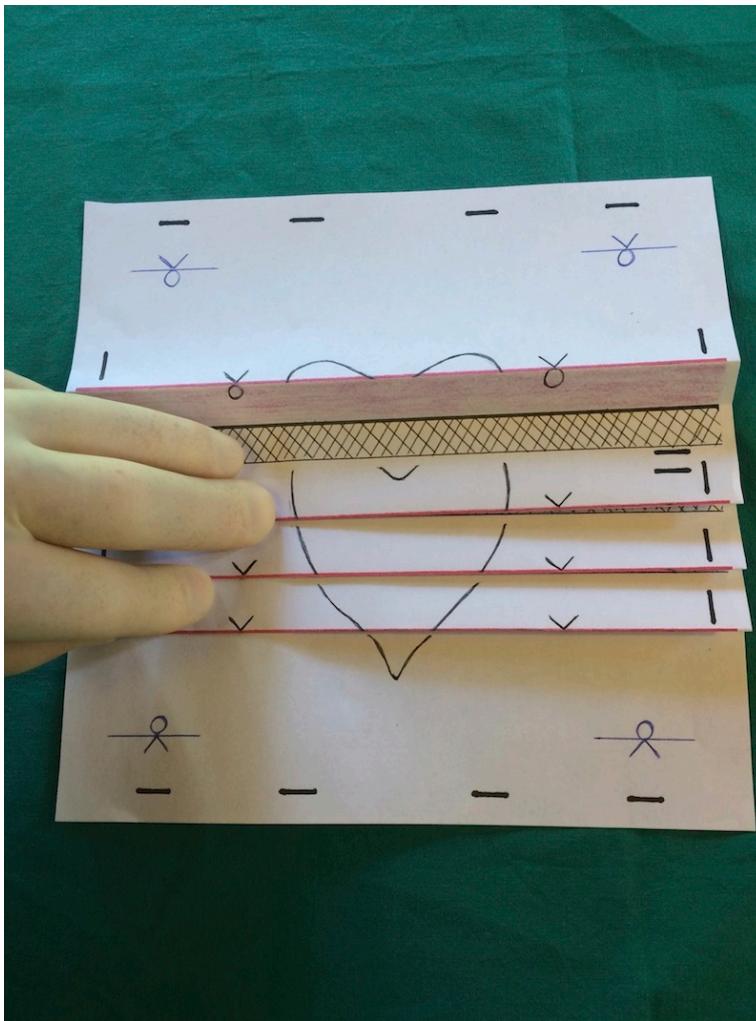


Répéter l'opération pour chaque pli. Un cœur doit progressivement apparaître sur la partie externe du masque

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

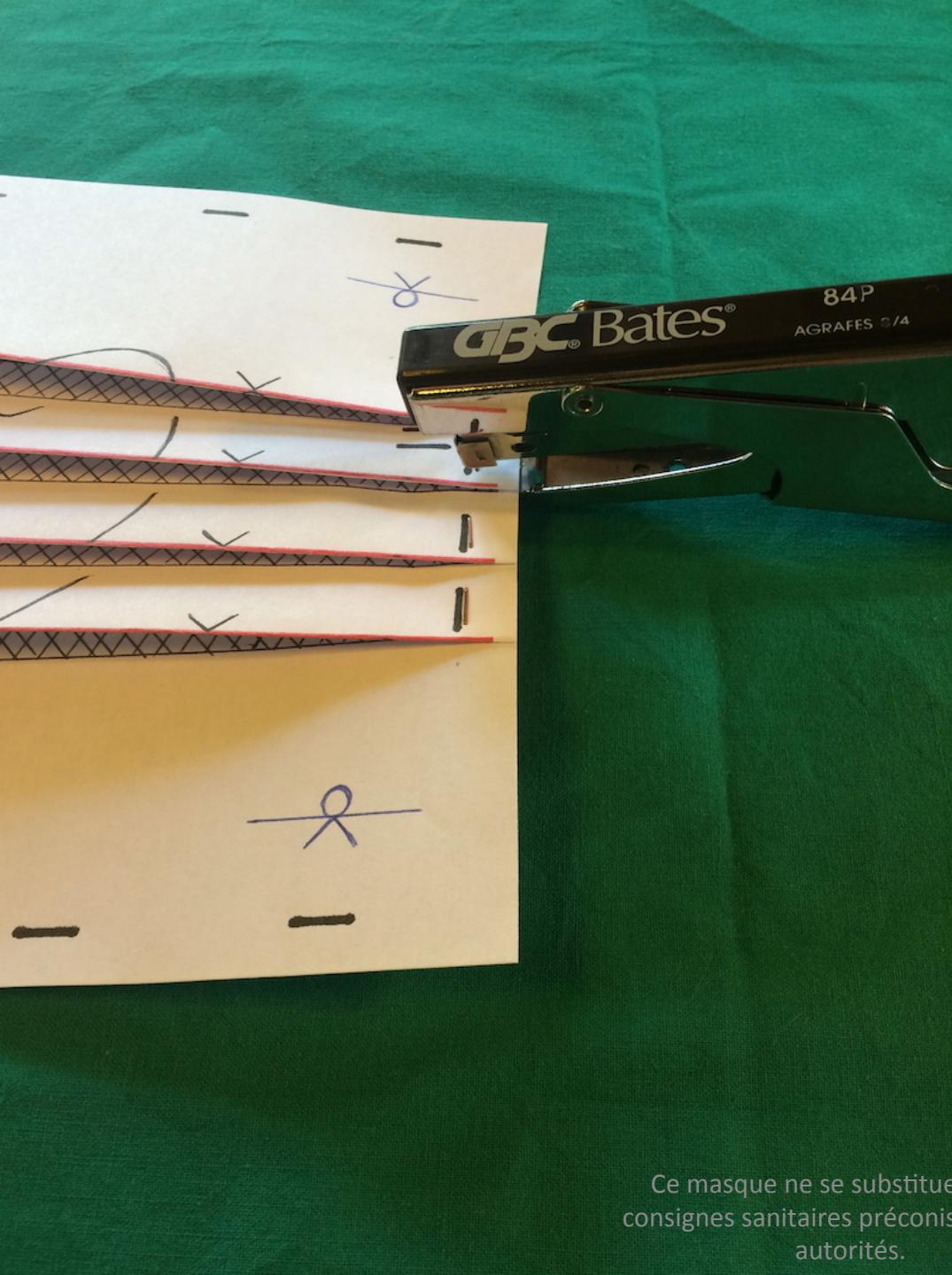


Agrafer latéralement chaque pli en utilisant les repères d'agrafe situés sur la partie droite du masque

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

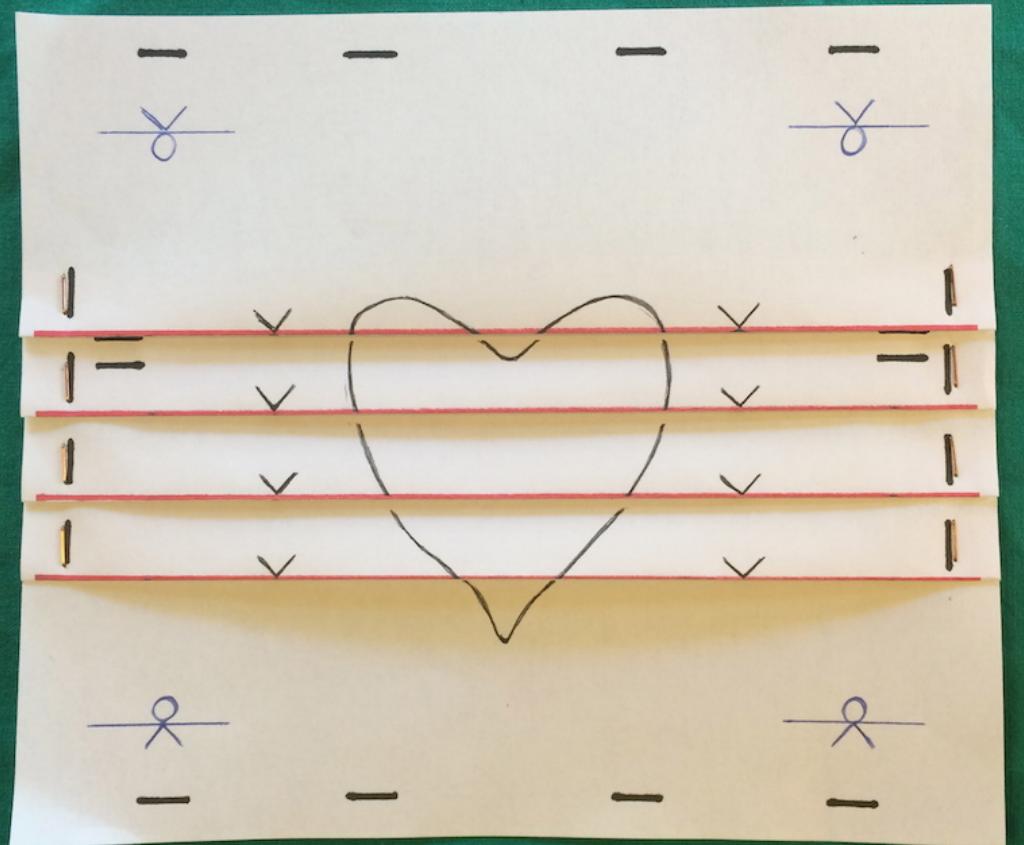


Répéter l'opération sur la partie gauche du masque

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

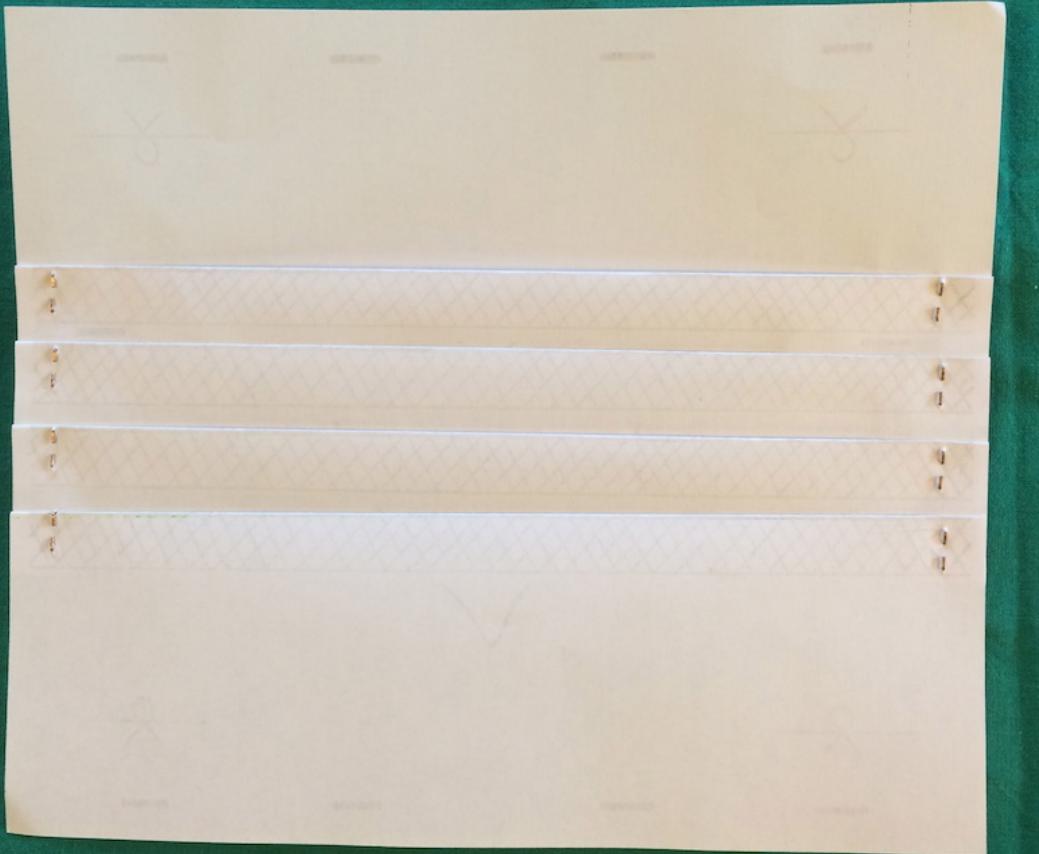

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

## Retourner le masque

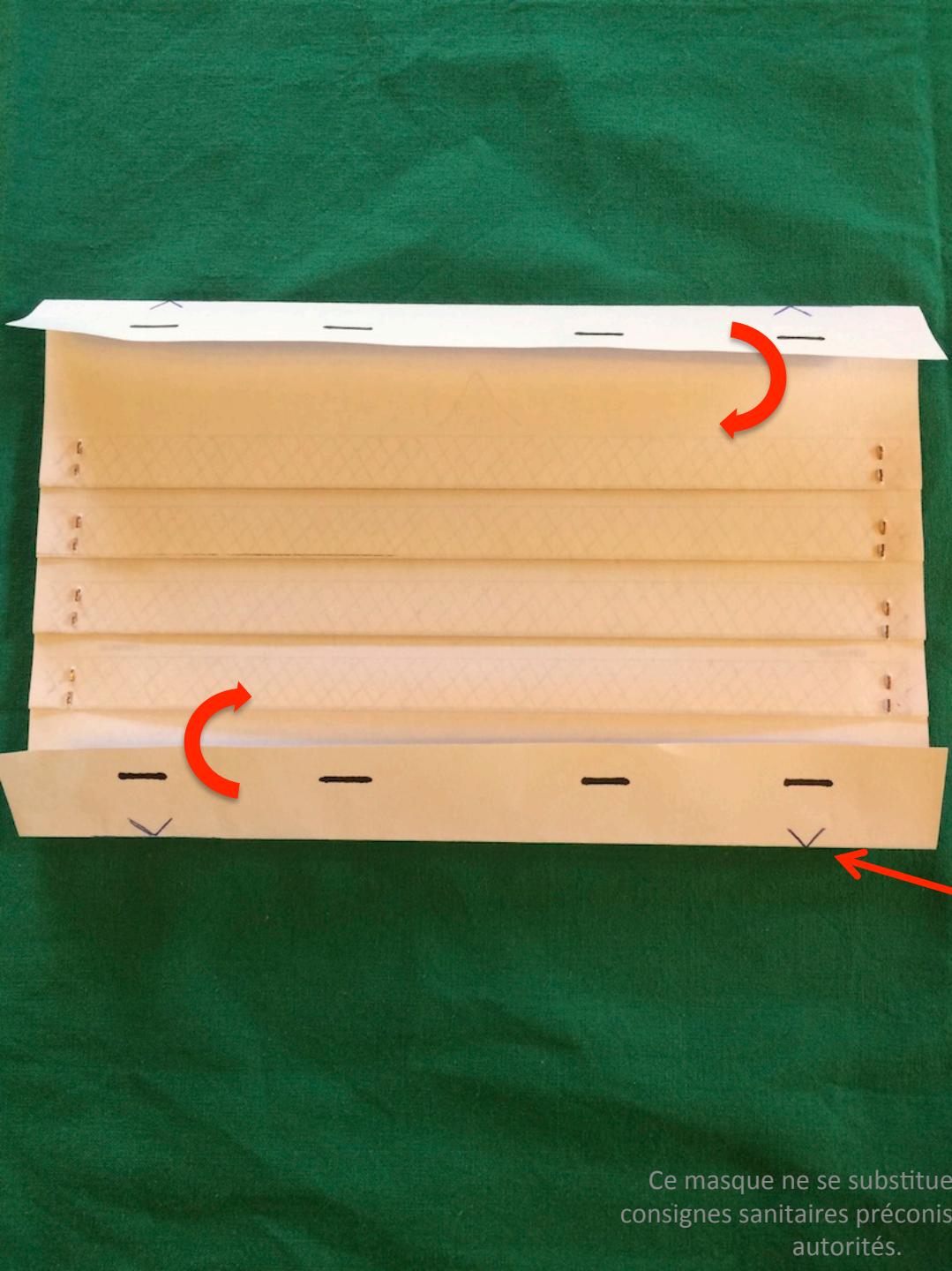

Rabattre la partie supérieure et inférieure du masque à la base des repères de pliage.

Seule la partie supérieure (V) du repère de pliage doit être visible. La partie inférieure du repère de pliage (O) doit disparaître

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.




Repère d'agrafe

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

Positionner le premier lien  
à l'intérieur du pli inférieur

Agrafer le pli en suivant les  
repères d'agrafe.

Veiller à ne pas positionner d'agrafe sur  
les liens afin qu'ils puissent coulisser

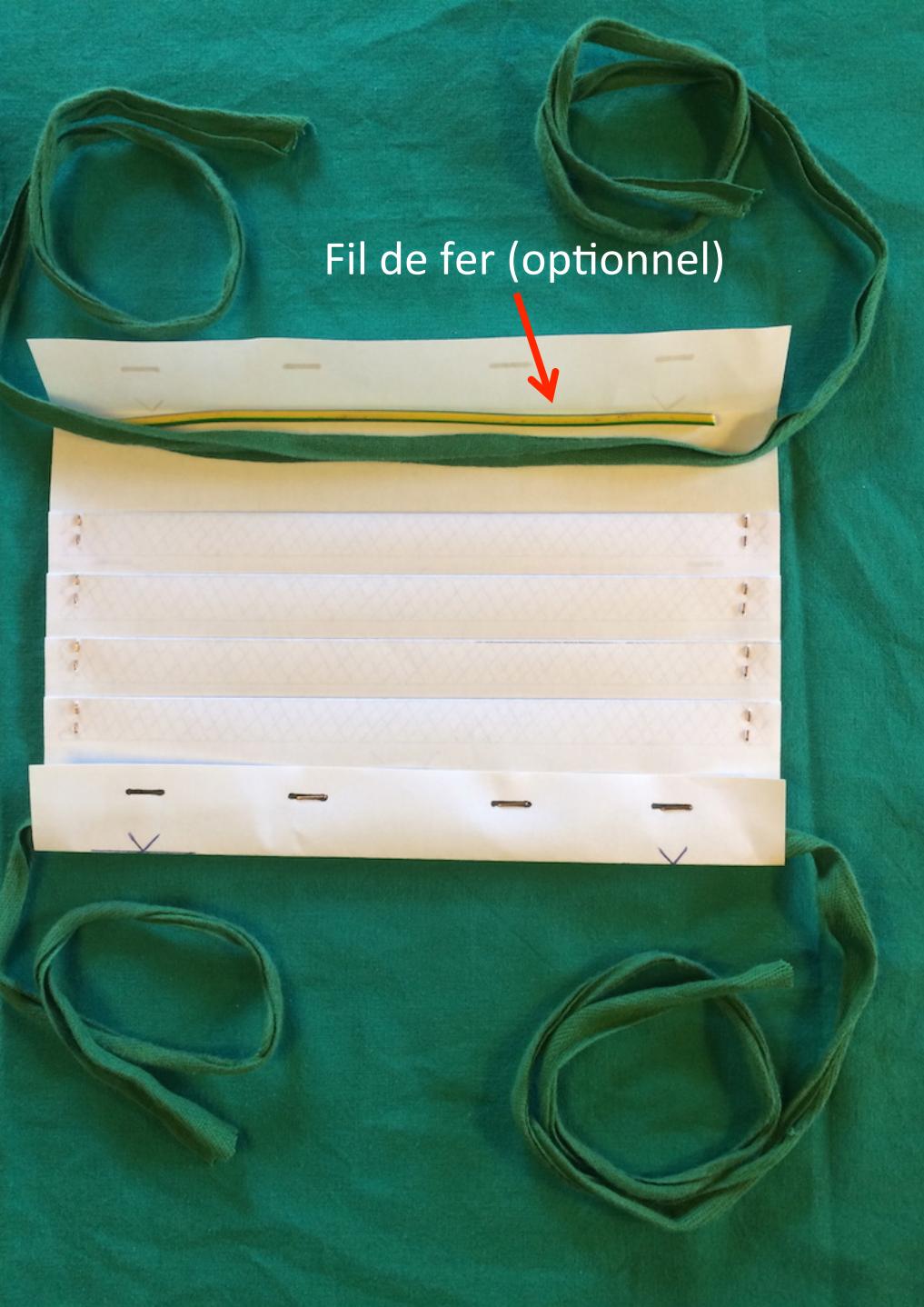


Positionner le deuxième lien  
à l'intérieur du pli supérieur

Agrafer le pli en suivant les  
repères d'agrafe.

Optionnel: Insérer le fil de fer dans le pli  
supérieur pour réaliser une barette  
d'ajustement

tue pas aux  
onisées par les

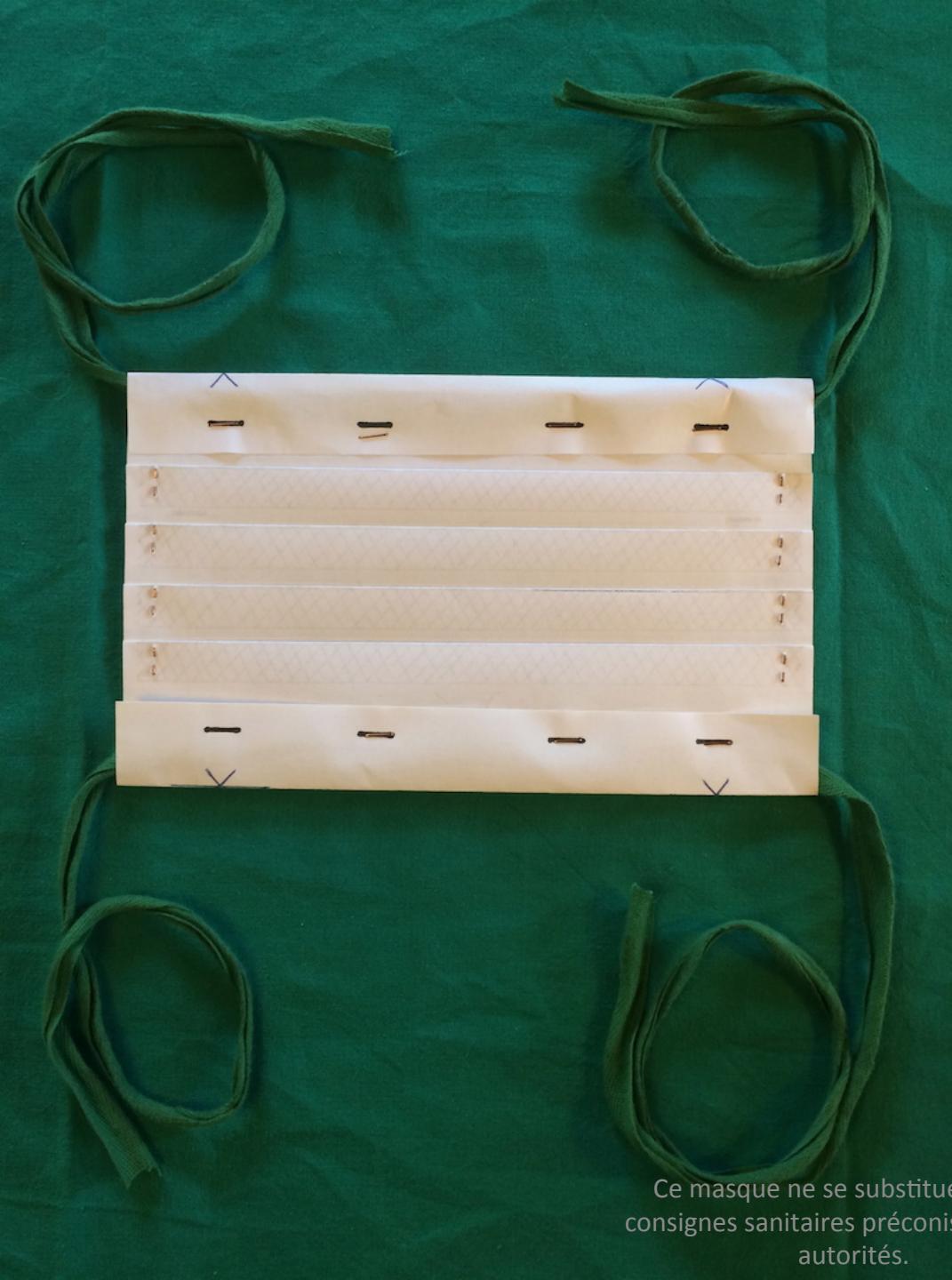




Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

La partie externe du  
masque est terminée

## Etape 2:

# Réalisation du filtre


Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

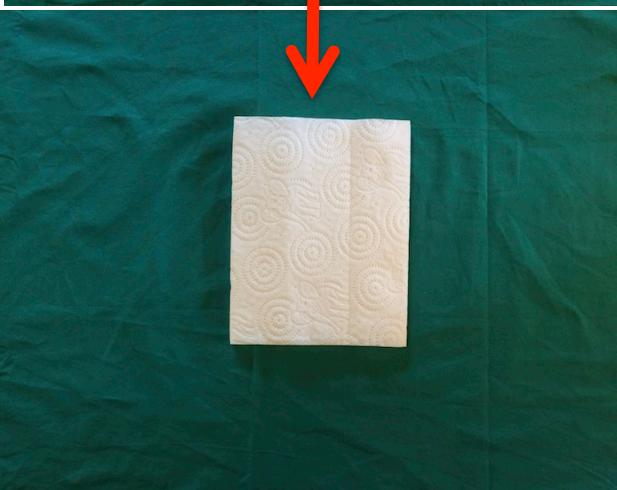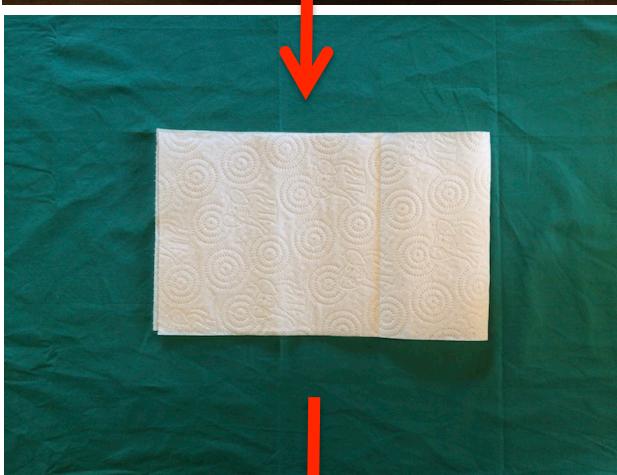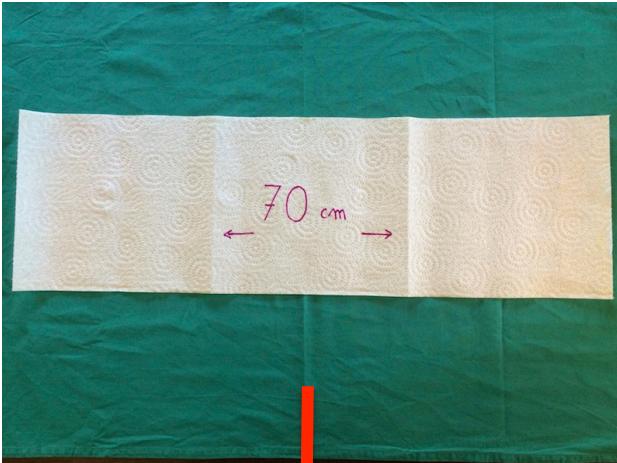

Plier en deux une bande de  
70 cm de papier essuie-tout



Replier en deux la bande de 35 cm  
ainsi obtenue

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

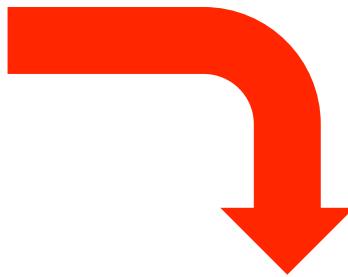


Faire pivoter le filtre de 90 degrés


Ce masque ne se substitue pas  
consignes sanitaires préconisées  
autorités.

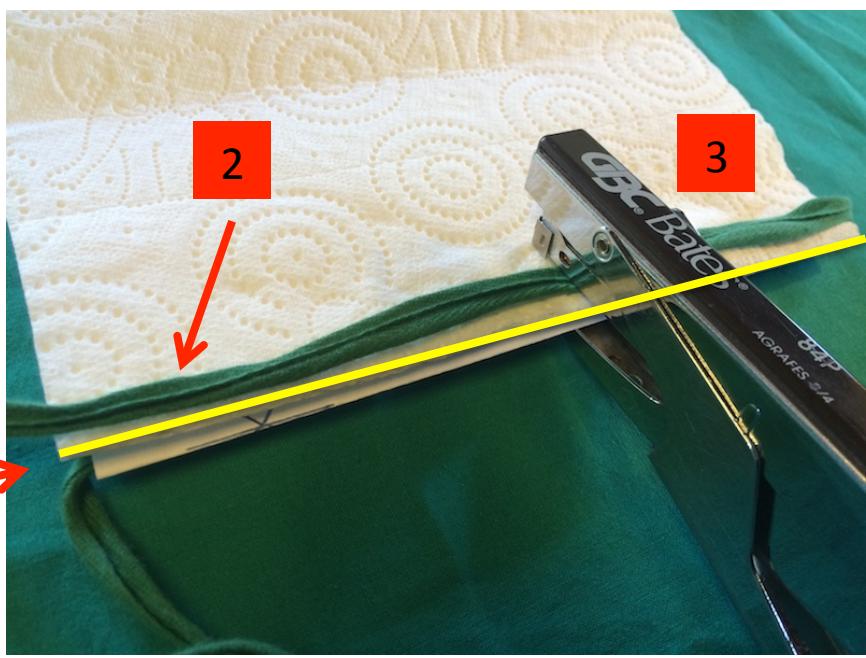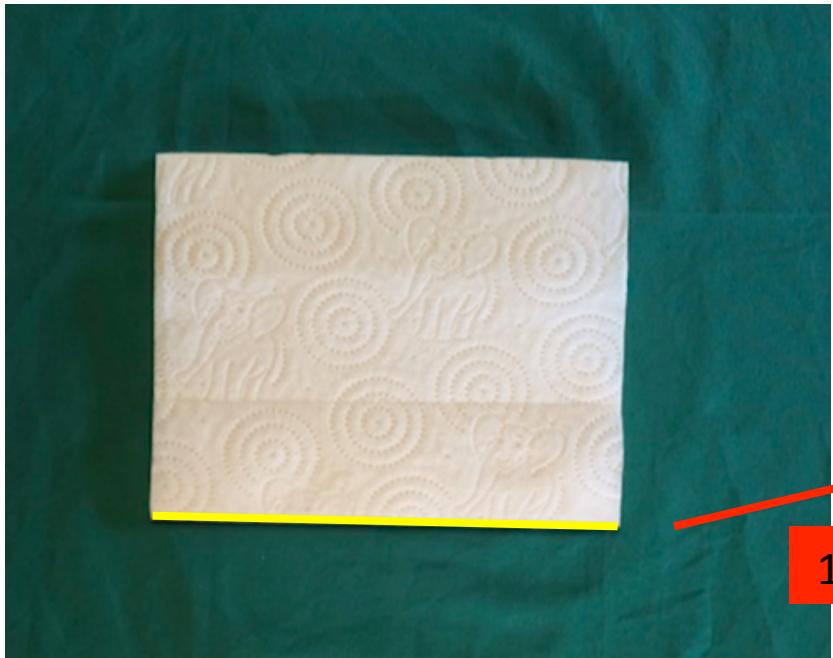

- 1 Positionner le bord inférieur du filtre sur le bord inférieur du masque
- 2 Rabattre le lien de droite sur le filtre pour matérialiser la situation des liens
- 3 Positionner l'agrafeuse au delà du lien et agrafer le filtre

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.

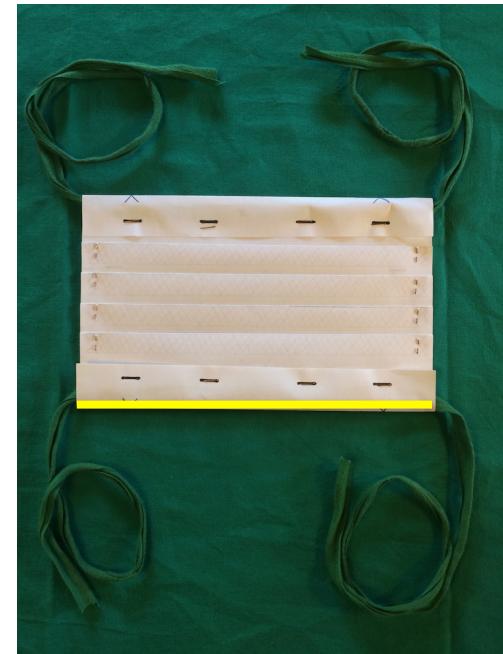


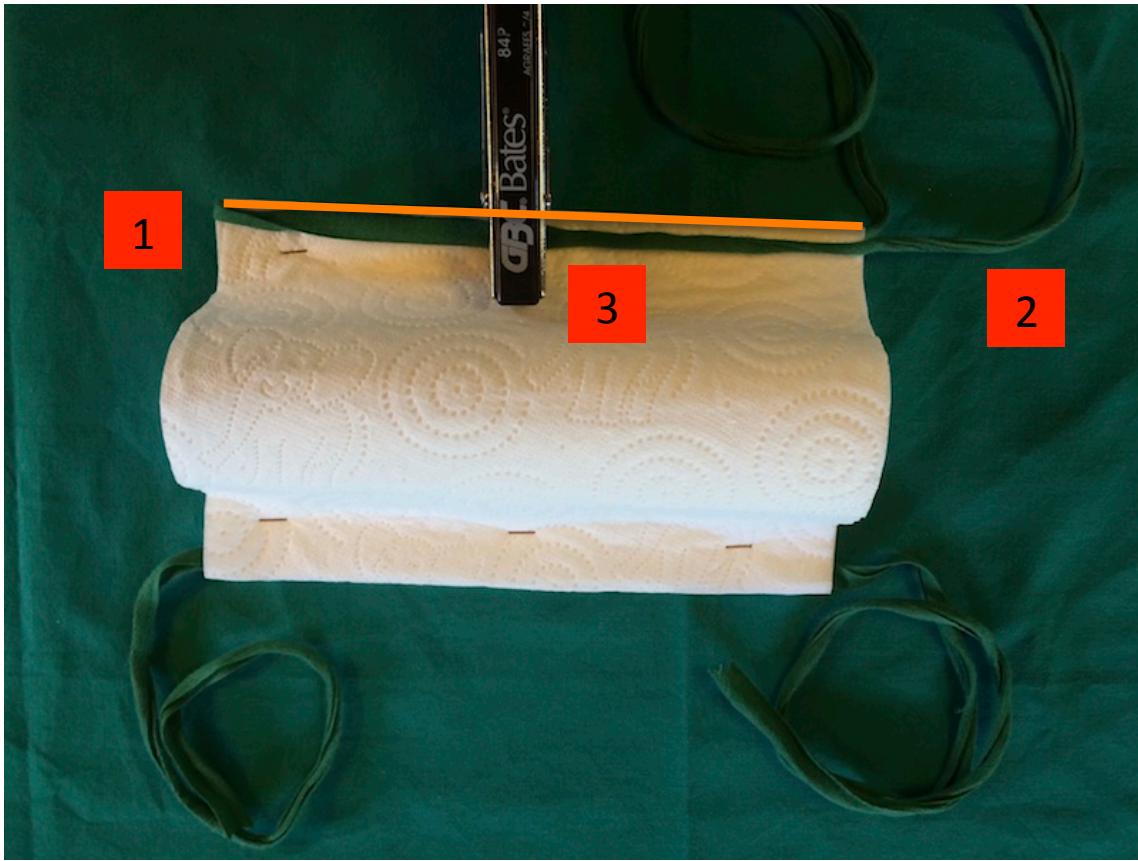

- 1** Positionner le bord supérieur du filtre sur le bord supérieur du masque
- 2** Rabattre le lien de gauche sur le filtre pour matérialiser la situation des liens
- 3** Positionner l'agrafeuse au delà du lien et agrafer le filtre


Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.



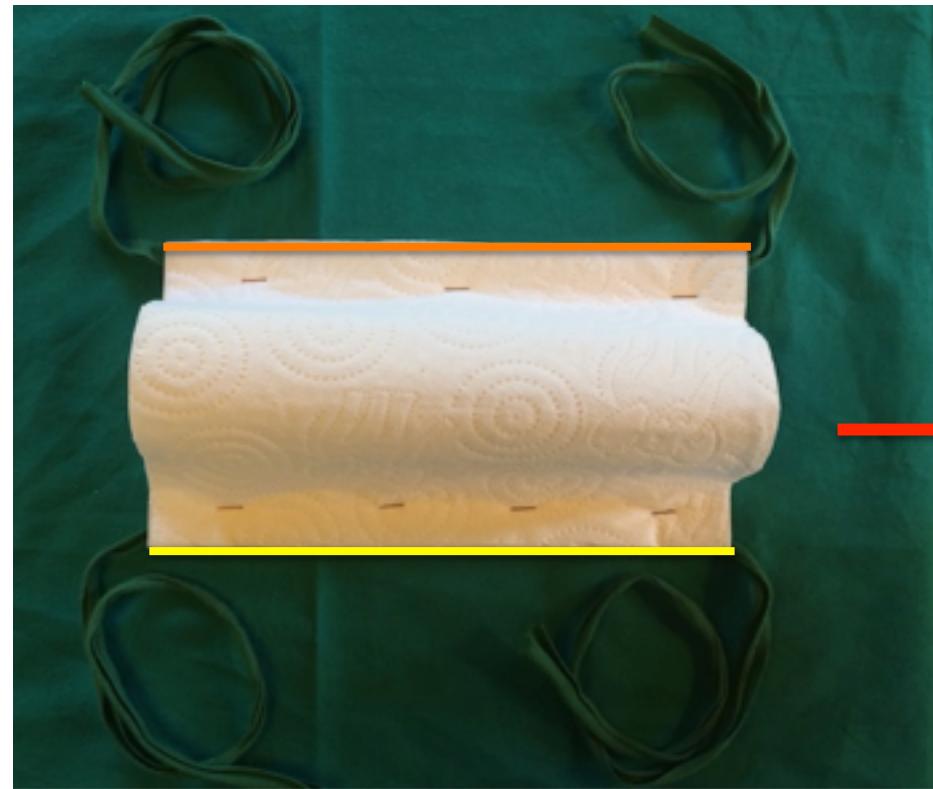


Déplier délicatement les plis extérieurs du masque  
en positionnant le filtre à l'intérieur du masque

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

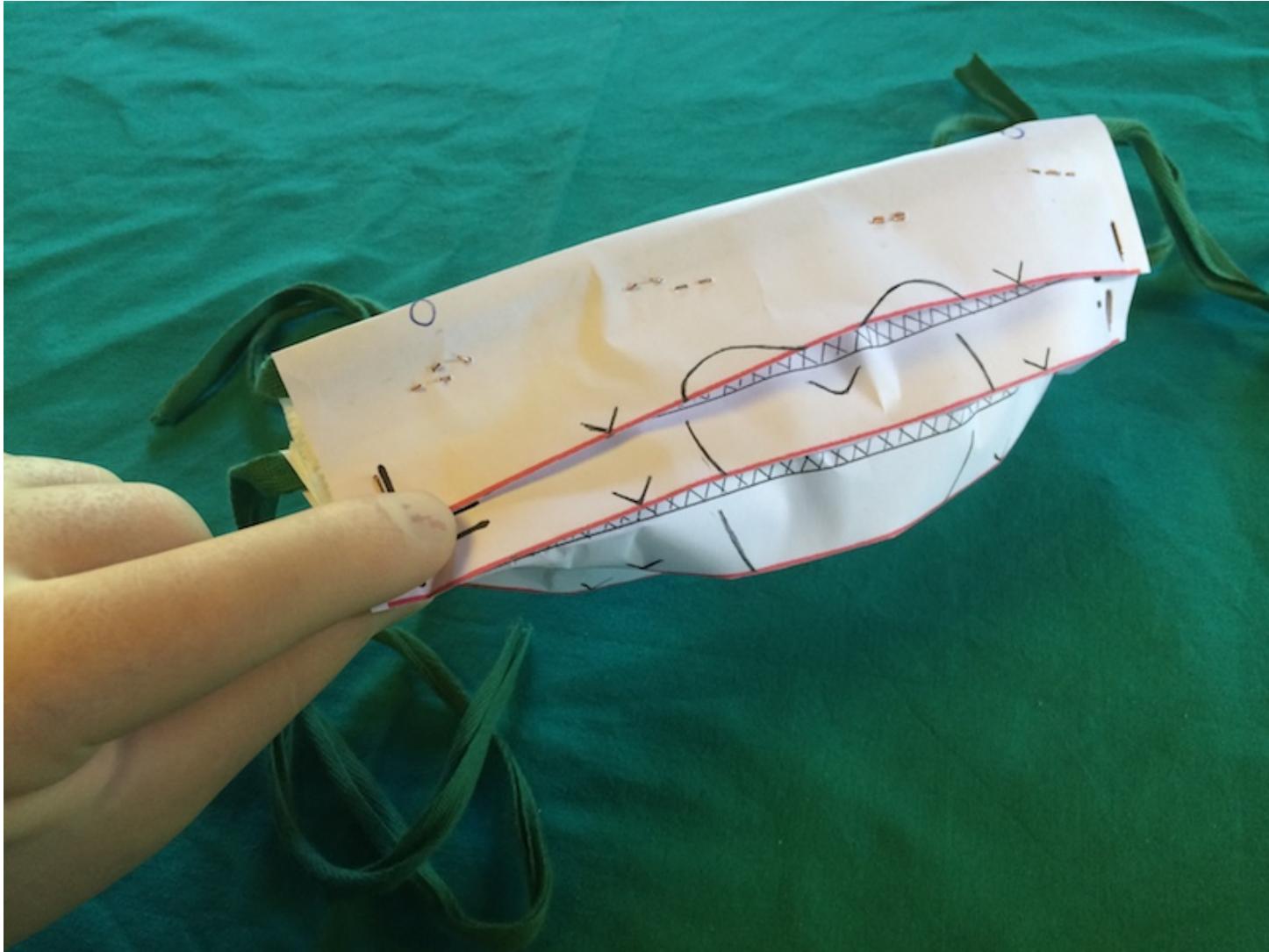

Pincer le bord du masque entre le pouce et  
l'index pour former un pli

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.

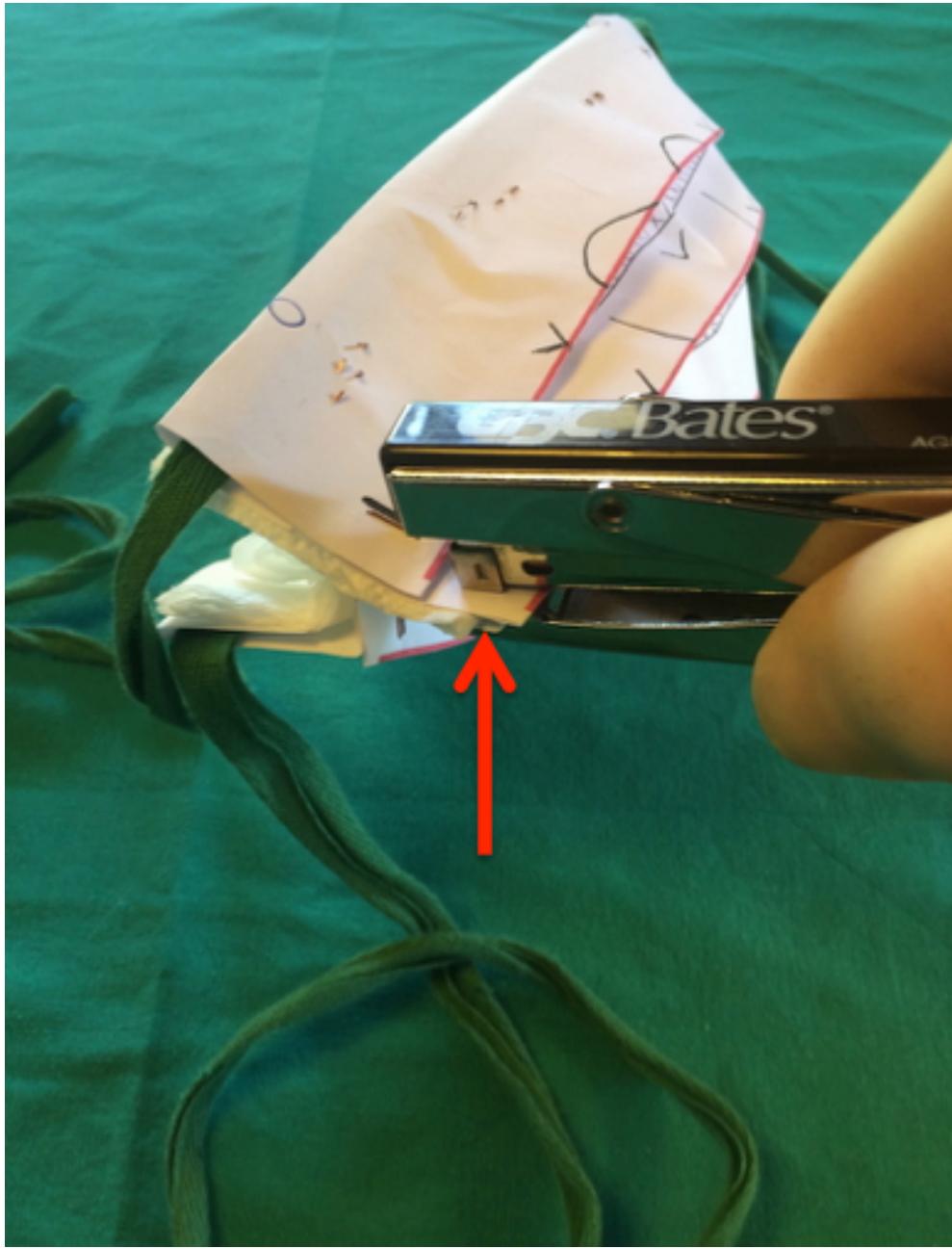

Agrafer le pli ainsi  
formé sur les repères  
d'agrafe

Ce masque ne se substitue pas aux  
consignes sanitaires préconisées par les  
autorités.



Positionner le masque sur le visage, nouer les liens derrière la tête et pincer le bord du masque sur l'arête nasale pour accroître l'étanchéité

Ce masque ne se substitue pas aux consignes sanitaires préconisées par les autorités.